

Nebulisator

Rutin för förskrivning av nebulisator för hemma bruk i region Kronoberg

Remissförfarande, utprovning och uppföljning

- Från primärvården skrivs konsultationsremiss till läkare på Lung- och allergimottagningen, för bedömning utifrån patientens journal.
- Lungläkare eller överläkare på medicinkliniken CLV alt. LL bedömer patients behov av nebulisator. Förskriver när behov finns.
- Läkaren på VC ansvarar för förskrivningen av inhalationsläkemedel.
- Utprovningen görs av lungfysioterapeut på CLV ev. några veckors väntetid. Patienten instrueras och bedömning av inhalationsteknik med aktuell nebulisator görs även att patienten är införstådd med hur och när inhalationerna ska tas. Genomgång av rengöringsrutiner för apparat och inhalationsdelar. Kontroll av andningsgymnastik och hostteknikövningar.
- På CLV görs telefonuppföljning eller en till flera uppföljningsbesök beroende på mått av förståelse för instruktionen.
- Remissvar i Cambio Cosmic och pappersremissen skickas tillbaka till första remittent som håller i uppföljningen.
- Vid specialfall kan nebulisator skickas via Transport till patientens vårdcentral. DSK eller hemsjukvården ansvar för att patient får information.
- Lungteamet på avd 4 sköter utprovningen i Ljungby. Ring: 585004. Patienten själv eller vårdpersonal hämtar apparaten och får då instruktion

Nebulisatorer

- Pari Turbo boy SX. Apparaten är upphandlad och förskrivs i 1:a hand. Den är eldriven och består av en kompressor, slang och nebuliseringsdelar, munstycke eller mask, även med vinkelstycke för inhalation i halvliggande. I Ljungby finns även Aiolos Albatross.
- Bärbara inhalationsapparater skrivs ut i speciella fall: AeronebGo och e-Flow drivs på el och batteri (dessa finns inte i Ljungby).

Förskrivning av nya inhalationsdelar

- Inhalationsdelarna till nebulisator utbytes efter 1-2 år, beroende på mått av användning. Patienten tar i första hand ansvar för att detta görs. Vårdcentralens läkare eller astma-KOL sköterska ansvarar för denna förskrivning på hjälpmedelskort till Apoteket.
- Inhalationsdelarna heter **PARI Turbo BOY årsförpackning S** beställningsnummer: **20 49 51** Senaste utskrift se Cosmic hjälpmedels del.

- Vid oklarheter eller vid fel på apparaten kontakta lungfysioterapeut på CLV eller lungteamet i Ljungby. Apparaterna servas inte utan byts ut v.b.

Skötsel och rengöring av din PARI SX (nebulisator) för hemmabruk

Efter varje inhalation:

Plocka isär inhalationsdelarna, diska dem i varmt vatten och diskmedel. Skölj delarna väl i kallt vatten, skaka av vattnet och lägg delarna på en handduk och låt lufttorka. Montera ihop delarna först när de är helt torra.

OBS! Vid användning av mask (i stället för munstycke) ska den lilla utandningsventilplattan på masken vara tryckt utåt så att det går att andas ut obehindrat under inhalationen.

En gång i veckan:

En gång i veckan behöver delarna desinficeras.

Koka upp en gryta med vatten. Dra bort grytan från plattan. Lägg delarna i ett durkslag eller en sil och låt dem ligga i det kokheta vattnet i 2 min.

Torka av kompressor, slang och sladd på utsidan med lätt fuktig trasa en gång per månad. Om det blivit fukt i slangen, blås den torr med luft från Pari-apparaten.

Utbyte av inhalationsdelar:

Inhalationsdelarna samt det vita filtret på kompressorn skall bytas ut efter 1–2 år, beroende på hur mycket du använder apparaten.

Nya delar får du genom att be läkaren eller astma-KOL sköterska på din vårdcentral skriva ut nya.

Du hämtar sedan dessa på Apoteket.

Inhalationsdelarna samt filtret heter


PARI Turbo BOY års

förpackning S och Apotekets

beställningsnummer är **20 49 51**.

Vid fel på apparaten eller återlämnade:

På CLV tar du kontakt med lungfysioterapeut alt. Medicinavdelning 5. På LL kontakta medicinavdelning 3. Apparaterna servas inte utan byts ut vid behov.

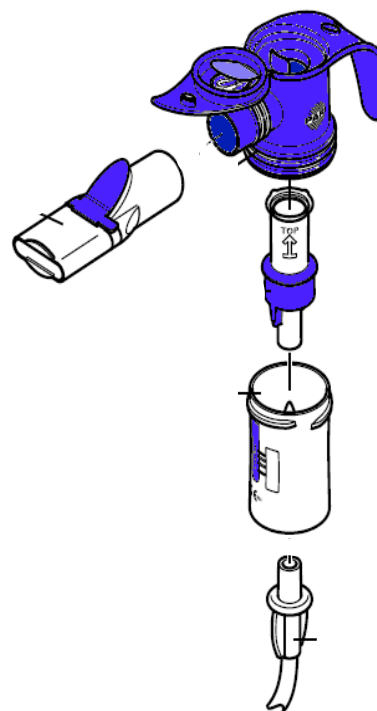

Återlämning av väl rengjord apparat till Medicinavdelning 5, CLV eller avd 4,
LL beroende på var du lånat den.