

Analyz F. O. B Test

PROVINSAMLING av F.O.B Test

1

Fånga upp lite avföring direkt på toalettpapper, eller lägg lite toalettpapper i toaletten för att samla avföring på.

2

Skruva av den **BLÅ** korken på provröret och ta ut medföljande provpinne. Den vita änden ska förbli orörd (endast till för laboratoriepersonal).

3







Stoppa den **BLÅ** provpinnens ände på flera olika ställen av avföringen.

4

Torka bort överflöd av avföring från provpinnen genom att försiktigt stryka mot toalettpapper. Endast avföring i skårorna.

5

Sätt tillbaka provpinnen i röret och skruva åt ordentligt.

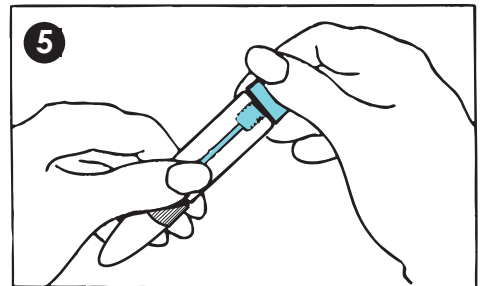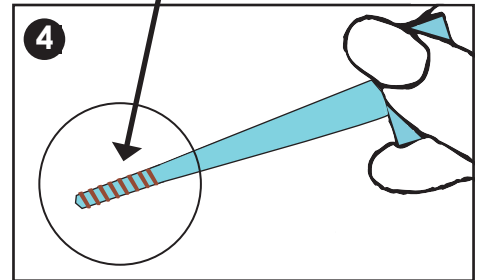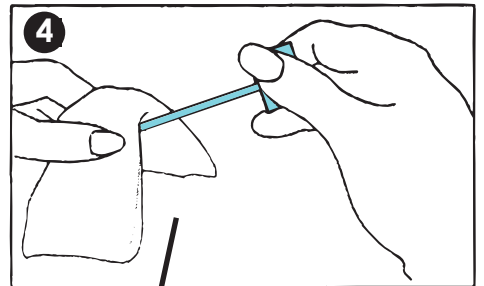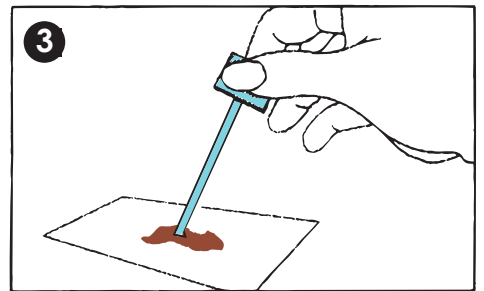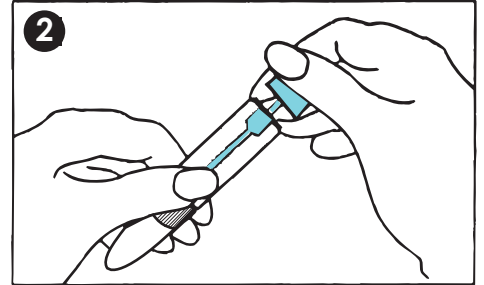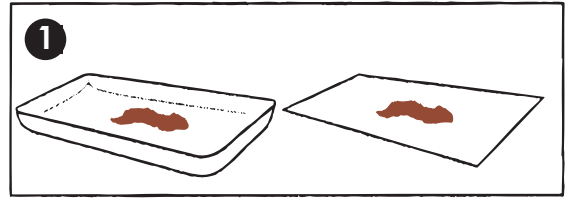

- Det är viktigt att **inte** provtagning sker under menstruation, blödande hemorrojder eller blod i urinen.
- Märk röret med namn, personnummer och datum för provtagning. Provet är nu klart för test och kan förvaras i rumstemperatur. Provet ska testas inom 7 dagar från provtagning.
- Tre på varandra följande prov, tagna olika dagar, krävs för en säker diagnostik.

* Vätskan i röret får ej förtäras