

Guide avtalade förbandsprodukter för vårdcentral 240101-280101



Innehåll

Innehåll	5
Upphandling	5
Rengöring	5
Utbildning	5
Barriärfilm	6
Hudskyddsapplikator Esenta	6
Hudskyddsapplikator Cavilon Advanced	6
Kommentar;	6
Biofilmsreducerande	7
Prontosan sårspollösning	7
Prontosan woundgel	7
Hypoklorbaserat sårpreparat	7
Sårgel Hydrocyn Aqua 15g tub	7
Sårspol Hydrocyn Aqua	7
	7
Fuktbevarande	8
Intrasite gel	8
Förband, Alginat	8
Kaltostat	8
Förband, gelbildande	8
Aquacel Extra och Aquacel band	8
Förband, honung	9
Activon Tube	9
Activone Tulle	9
Actilite	9
Förband, Hydrokolloid	10
DuoDERM E	10
DuoDERM extra thin	10
Förband, Kol	10
CarboFlex	10

Förband, polyreutan	11
Tegaderm foam adhesive.....	11
Kliniderm foam.....	11
Mepilex Border Flex Lite och Mepilex Border Flex.....	11
Mepilex Up.....	11
Mepilex transfer	12
Mepilex lite.....	12
Mepilex border sacrum	12
Mepilex Heel.....	12
Allevyn Gentle Border Heel	12
Kliniderm foam hälförband	12
Förband, Silver.....	13
Aquacel Ag+Extra och Aquacel Ag+band	13
Mepilex Ag.....	13
Förband, superabsorbent.....	14
Kliniderm superabsorbent	14
Cutimed Sorbion.....	14
Superabsorbent för helt underben.....	14
Cutimed Sorbion Sachet XL 45 x 25cm	14
DryMax Soft 37x56cm	14
Förband, svamp och bakteriebindande	15
Sorbact compress och Sorbact Ribbon Gauze	15
Sorbact Gel Dressing	15
Sorbact Foam Dressing.....	15
Sorbact surgical dressing	15
Förband, upprende	16
Cutimed HydroControl	16
Polymem Max och Wic	16
IODOSORB salva och kompress	16
Häftborttagning	17
Eakin Release Spray	17
Salts Adhesive Remover Wipes	17

Remove servett	17
Sårrengöring	18
Ringcurette	18
Debrisoft Duo.....	18
Debrisoft Lolly.....	18
Förband, proteashämmande	18
Proteashämmande förband.....	18

Innehåll

Avtalade förbandsprodukter från 2024-02-01-2028-01-31 med fokus på förband för svårläkta sår. Förbanden är indelade i grupper utifrån deras funktion. Om ett förband finns representerat i flera grupper, presenteras endast utförlig information i en av grupperna - hänvisning finns till rubrik. Flera av förbanden finns i fler storlekar än vad som finns presenterat. Kompressionsprodukter finns i ett separat kompendium "Kompressionssortiment 2024". Denna guide innehåller inte produkter som elastiska bindor, ABS förband, filmförband och olika typer av fixering. *Tänk på att det finns anpassade fixeringar för patienter med känslig hud så som fixering med silikon.*

Upphandling

Upphandlingsförfarandet: En referensgrupp med ansvarig upphandlare, materialkonsulent, vårdhygien och representanter från verksamheten utses. Dessa ska vara väl insatta i det produktområde som ska upphandlas och ha mandat att företräda verksamheten. De deltar aktivt med att ställa relevanta produktkrav, ansvarar för tester och testprotokoll samt deltar vid införandet av nya produkter. Under hela förfarandet råder sekretess.

Rengöring

För att minska bakteriebördan i ett sår och skapa förutsättning för sårsläkning är rengöring det viktigaste. Vid omläggningen bör tiden rengöring stå för mer än hälften av tiden. Ett sår kan rengöras på olika sätt; mekaniskt med sax och pincett och/eller sårslev och monofilamentsvamp eller med autolys. Vid mekanisk rengöring används färsktappat ljummet kranvatten, låt rinna 1 minut. Vid steril omläggning används de nödvändiga sterila lösningarna.

Utbildning

På RiksSårs hemsida (www.rikssar.se) finns en kostnadsfri utbildning för personal som träffar och behandlar patienter med svårläkta sår. För personal som jobbar i Region Kronoberg finns även ett kompetenskort i kompetensportalen som heter Sår och sårbehandling.

Barriärfilm

Hudskyddsapplikator Esenta

Skapar en andningsbas barriär på huden och skyddar upp till 72h. Minskar risken för hudskador och irritation från kroppsvätskor.

Storlek; 1ml och 3ml pinnar.

Leverantör; ConvaTec



Hudskyddsapplikator Cavilon Advanced

Storlek; 2,7ml

Leverantör; 3M



Kommentar;

Det finns även barriärkräm och skyddsfilm i sprayform samt barriärtvättlappar.

Biofilmsreducerande

Prontosan sårspollösning

För omslag i 15 minuter. Har en mycket god rengörande verkan och går igenom bakteriernas biofilm. Biofilm= skyddar bakterier från antiseptika, antibiotika och kroppens egen uppremsande förmåga så kallad autolys.

Volym 250ml har 8 veckors hållbarhet i öppnad förpackning.

Engångsampull 40 ml

Prontosan woundgel 50 g

Gelen har 8 veckors hållbarhet, öppnad förpackning. Kan kombineras med olika typer förband och ger en uppremsande och fuktig sårmiljö.

Leverantör; B. Braun Medical



https://www.bbraun.se/sv_se/produkter-och-behandlingar/sarлакning/prontosanskolan.html

Hypoklorbaserat sårpreparat

Sårgel Hydrocyn Aqua 15g tub

Appliceras i sårbädd efter rengöring för att bevara fuktig sårmiljö och reducera bakteriell belastning.



Hållbar 90 dagar (öppnad förpackning)

Sårspol Hydrocyn Aqua

Används för sårspolning och rengöring för att reducera bakteriell belastning.

Volym 100ml pumpspray, 250ml med skruvkork.



Hållbar 30 dagar (öppnad förpackning)

Fuktbevarande

Intrasite gel

Underlättar den fuktiga sårsläckningen, reducerar smärta. Trögflytande, Val av täckförband beror på exsudat-mängden. Fungerar tillsammans med polyuretanskum.



Leverantör; Smith & Nephew

Förband, Alginat

Kaltostat

Gelbildande natrium-kalciumalginat för måttligt till kraftigt vätskande sår. Har visat sig ha viss hemostatisk effekt på lätt blödande sår.



Leverantör; ConvaTec

Förband, gelbildande

Aquacel Extra och Aquacel band

Hydrofiberförband med förstärkande fibertrådar, gelbildande och högabsorberande.

Placera Aquacel Extra direkt i sårhåla eller på såret och lämna en marginal på minst 1 cm utanför sårkanten. Täck med lämpligt fuktbevarande ytterförband. Finns i olika storlekar.

Leverantör; ConvaTec



Förband, honung

Activon Tube

Flytande honung, 100% ren Manukahonung. Manuka honung skyddar såret och ger en fuktig sårhelingsmiljö. Detta är känt att vara till nytta för sårhelning och främja snabbare läkning.

Leverantör; Observe Medical



Activone Tulle

Viskos compress mättad i 100% Manuka Honung. Activon Tulle skapar en fuktig sårhelingsmiljö, tar bort odör samt har en antibakteriell effekt. Lämpligt för ytliga eller granulerande sår samt för debridering eller upprepning av nekrotiskt eller oren vävnad

Leverantör; Observe Medical



Actilite

Tunt viskosnät med 99% Manuka honung och 1% Manukaolja. Förbandet skyddar såret och påskyndar läkningen samtidigt som sårsekret tillåts passera genom förbandet. Manukahonungen och Manukaoljan i kombination har visat sig vara effektiv mot ett flertal mikroorganismer som är involverade i sårinfektioner.

Leverantör; Observe Medical



Förband, Hydrokolloid

DuoDERM E

Hydrokolloid, helt tätt förband som smälter av kroppsvärme. Rengör alltid såret innan ny bedömning. Skydda sårkanterna. Främjar kroppsegen upprepning och löser effektivt nekroser. Används med försiktighet och vaksamhet på fotsår vid diabetes. Finns även med borderkant i en storlek, 10x10cm.



Leverantör; ConvaTec

DuoDERM extra thin

Torra till lätt vätskande sår. Kan användas som ytterförband för att fixera Aquacel Extra eller Aquacel Extra AG. Kan användas i kombination med steroidkrämer vid behandling av exempelvis eksem.



Leverantör; ConvaTec

Förband, Kol

CarboFlex

Icke vidhäftande förband som används som primärförband vid ytliga sår i kombination med sårfillare vid förekomst av sårhåla. Förbandet består av absorberande lager samt aktivt kolfilter speciellt framtagna för att hantera både vätska och lukt från sår.



Leverantör; ConvaTec

Förband, polyreutan

Tegaderm foam adhesive

Polyuretanskum med häftkant. Hög absorptions och avdunstningsförmåga. Patenterad stjärnliknande utformning gör att den passar på svårapplicerade ställen ex. över leder.

Finns format som små förband till fingrar och tår "blomman eller flygplanet"

Leverantör; 3M



Kliniderm foam

Icke vidhäftande polyureutanskum förband utan borderkant. Absorberar mycket sårvätska och kan sitta upp till 7 dagar. Kan användas under bindor.

Leverantör; Medioplast



Mepilex Border Flex Lite och Mepilex Border Flex

Polyureutanskum förband med Safetac (silikonyta) som gör den vidhäftande. Finns i olika storlekar med olika absorptionsmängd.

Leverantör; Mölnlycke



Mepilex Up

Används vid måttligt till rikligt vätskande sår med tjockflytande exsudat. Förbandet har större porer som möjliggör effektiv absorption och vertikal transport av sårvätska.



Mepilex transfer

Mjukt förband med Safetac (silikon) för vätskande sår. Transporterar effektivt bort vätska från såret och minskar risken för maceration. I kombination med ett lämpligt ytterförband upprätthålls en fuktig sårmiljö.

Leverantör; Mölnlycke

**Mepilex lite**

Tunt polyuretanskum för lätt vätskande sår. Tunn design som gör det mjukt och formbart.

Leverantör; Mölnlycke

**Mepilex border sacrum**

Specialformat för sacrala sår. Kan användas förebyggande mot trycksår och om huden är oskadad kan förbandet reappliceras efter inspektion under 3 dygn. Därefter ska förbandet bytas.

Leverantör; Mölnlycke

**Mepilex Heel**

Format för att passa som hälförband. För måttligt till rikligt vätskande sår.

Leverantör; Mölnlycke

**Allevyn Gentle Border Heel**

Ger en effektiv vätskehantering anpassad i formen efter hälen, men är flexibel och kan även användas till andra kroppsdelar så som armhåla.

Leverantör; Smith and Nephew

**Kliniderm foam hälförband**

Hälförband utan vidhäftning.

Leverantör; Mediq



Förband, Silver

Aquacel Ag+Extra och Aquacel Ag+band

Bakteriedödande och biofilmsnedbrytande förband med förstärkande fibrer.

Högabsorberande. Bildar en mjuk fuktighetsbevarande gel som binder in sårvätska och bakterier. Effekt upp till 7 dagar.

Primärförband på måttligt till kraftigt vätskande infekterade sår eller vid ökad risk för infektion.

Lägg med minst 2 cm utanför sårkant och täck med fuktbevarande sekundärförband

Leverantör; ConvaTec



Mepilex Ag

Antimikrobiellt skumförband som kombinerar silver med safetac. Absorberar sårsekret och bibehåller fuktig sårmiljö. Används till sår som inte läker normalt och som visar ökade tecken på bakteriell påverkan.

Leverantör; Mölnlycke



Förband, superabsorbent

Kliniderm superabsorbent

Superabsorberande förband för kraftigt vätskande sår. Vertikal absorbtion-ytan förblir torr. Förbandet bör gå 2,5 cm utanför sårkant och läggas direkt mot sårytan. Kan användas under kompression. Finns i flera storlekar.

Leverantör; Mediq



Cutimed Sorbion

Superabsorbent med annorlunda form för att underlätta fixering. Finns även med slits till dränageslangar eller katetrar.

Leverantör; Essity



Superabsorbent för helt underben

Cutimed Sorbion Sachet XL 45 x 25cm

Superabsorberande förband för kraftigt vätskande sår. Binder effektivt exsudat och skyddar omgivande hud mot maceration. Förbandet ska läggas med marginal utanför sårkanten, har en följsam form som passar bra runt exempelvis ankeln och kan användas under kompression.



DryMax Soft 37x56cm

Mjukt och högabsorberande förband för vätskande sår. Binder exsudat och skyddar omgivande hud mot maceration.

Förbandet läggs med marginal utanför sårkanten, är följsamt och tillräckligt stort för att täcka både fot och underben, och kan användas under kompression.

Förband, svamp och bakteriebindande

Sorbact compress och Sorbact Ribbon Gauze

Bakterie och svampbindande förband av hydrofob (vattenavvisande väv). Viktigt att Sorbact har direktkontakt med sårytan. Feta produkter som salva och kräm kan inte kombineras med Sorbact eftersom de binder sig till väven och försämrar effekten.


Leverantör; Abigo



Sorbact Gel Dressing

Bakterie- och svampbindande sårkontaktlager i acetatväv kombinerat med vattenbaserad gel. Kan användas både till rena och kontaminerade eller infekterade sår.

Leverantör; Abigo

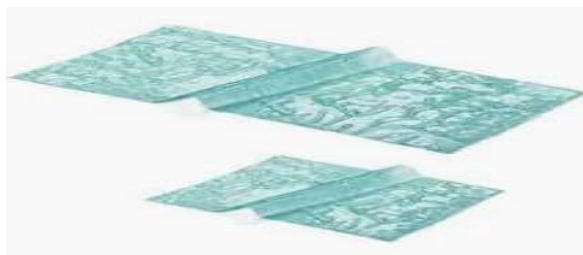

Sorbact Foam Dressing

Bakterie- och svampbindande polyuretanskumförband med en kontaktyta i acetatväv lämpligt vid lätt till måttligt vätskande sår.

Leverantör; Abigo



Sorbact surgical dressing

Bakterie- och svampbindande sårförband, genomskinlig självhäftande film för torra till lätt vätskande sår.

Leverantör; Abigo



Förband, upprensande

Cutimed HydroControl

Stillastående sår, torra sår och nekrotiska fibrinbelagda sår. Skapar balanserad sårmiljö, tar hand om exudat och tar bort ödem i sårbotten genom osmos.

Leverantör; Essity



Polymem Max och Wic

Multifunktionellt förband. Upprensning med hjälp av Surfactant F68 som aktiveras av fukt. Glycerin i förbandet drar upp exsudat med näringsämnen och tillväxtfaktorer från djupare vävnad till såret. Överflödigt vätska absorberas i förbandet. Reducerar smärta och inflammation. Förebygger biofilm.

Cavitet: Fyll 2/3 av såret med Polymem WIC. Täck med Polymem MAX minst 1 cm utanför sårkanten. Använd aldrig gel eller alginat mellan förband och sår. Finns med borderkant.

Leverantör; PartnerMed



IODOSORB salva och kompress

Kompressen klipps i sårets storlek.

Reducerar flertalet mikroorganismer genom långsam frisättning av jod. Kraftigt uppsugande. När all jod har frisatts ändrar förbandet färg till grågult och det är dags att byta.

Kontraindikation: Överkänslighet mot jod, störning av thyroideafunktion

Leverantör; Smith & Nephew



Häftborttagning

Eakin Release Spray

Häftborttagning, alkoholfri och silikonbaserad spray.

Leverantör; M Care



Salts Adhesive Remover Wipes

Häftborttagning, våtservetter

Leverantör; M Care



Remove servett

Leverantör; Smith and Nephew



Sårrengöring

Ringcurette

Använd bedövning före användning. Vass på ena sidan. Upphöjning på curetten visar den vassa änden. Upphöjningen ska vara riktad uppåt vid rengöring. Finns i olika storlekar.

Leverantör; Observe Medical



Debrisoft Duo

Används för mekanisk rengöring av sår med beläggningar, fibrin, nekros eller biofilm. Produkten fuktas före användning och appliceras med lätt tryck i sårbädden för att avlägsna föroreningar och förbättra sårmiljön. Debrisoft Duo är avsedd för engångsbruk och ska kasseras efter användning.



Debrisoft Lolly

Används för mekanisk rengöring av sårbädd, sårkanter och omkringliggande hud vid beläggningar, fibrin, nekros eller biofilm. Produkten fuktas före användning och möjliggör riktad och skonsam rengöring, särskilt i mindre eller svåråtkomliga områden. Debrisoft Lolly är avsedd för engångsbruk och ska kasseras efter användning.



Förband, proteashämmande

Proteashämmande förband

Under upphandling

Guide avtalade förbandsprodukter
för vårdcentral 240101-280101