

MEDIAHANTERAREN OCH UPLOAD & STORE

MEDIAINSAMLING

Tidigare Mediaverktyg

De tidigare verktygen man använt sig av är:

Comprima – bifogat bilder via journalvyn.


Picsara - via ett uthopp ifrån Cosmic samlat in media som bilder, video och ljud, dock finns där ingen koppling IN i Cosmic.

Nya Mediaverktyg

Efter införandet av ett nytt system på Röntgen finns det nu en ny modul i Cosmic samt en ny app.

I verktyget **Mediahanteraren** skapas mediaunderlag som plockas upp i appen **Upload and store** där insamlingen sker. Media öppnas sedan direkt ifrån Cosmic via ett mediavisningsverktyg **Uniview**.

MEDIAHANTERAREN/ U&S- FLÖDE

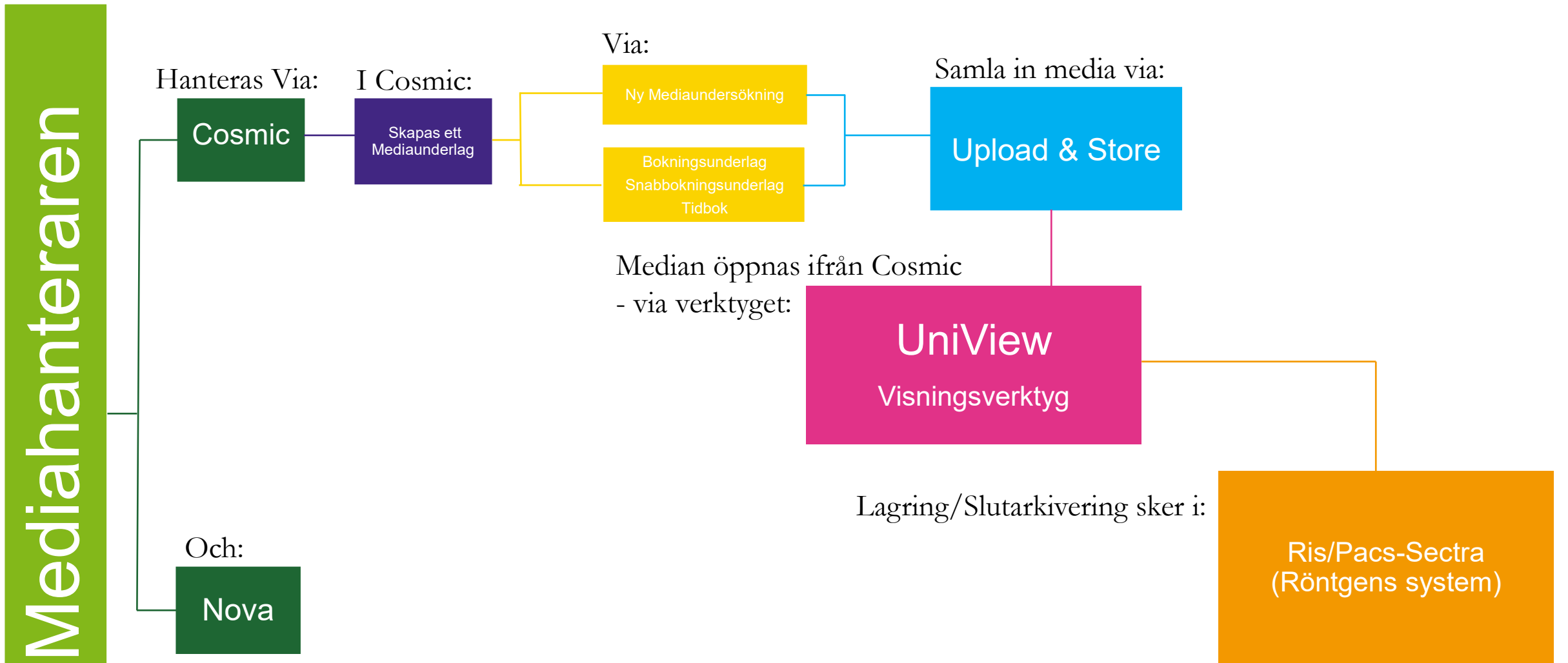

MEDIAHANTERAREN - COSMIC


Mediahanteraren gör det möjligt att skapa mediaunderlag i Cosmic och importera media genom appen Upload & Store.

Mediaunderlag för en mediaundersökning kan **autogenereras** via bokning eller skapas **manuellt**.

Mediaundersökningar kan kopplas/bifogas i journalanteckningar och i remisser.

MEDIAHANTERAREN - COSMIC

Via Cosmic Meny, Beställning och svar nås **Mediahanterare** och fönsterna **Mediaundersökningar** och **Ny mediaundersökning**.

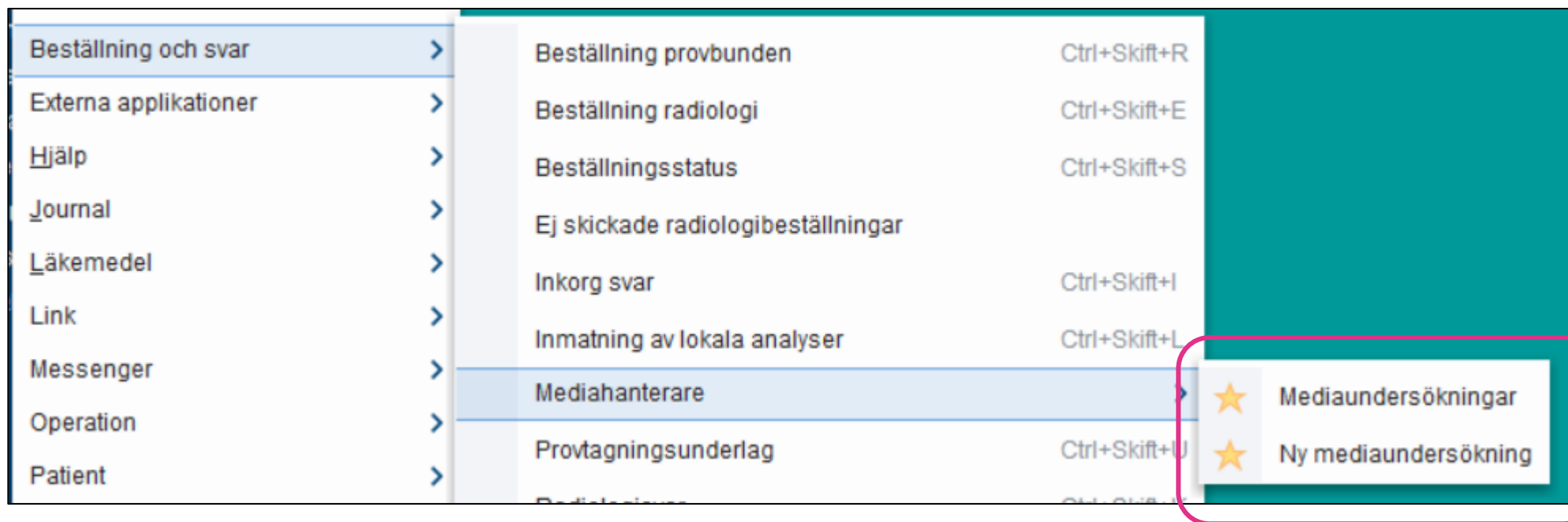

MEDIAHANTERAREN - SKAPA EN NY MEDIAUNDERSÖKNING

Det går att skapa nya mediaunderlag via olika fönster i Cosmic

Automatiskt flöde = När ett nytt mediaunderlag skapas via:

- Bokningsunderlag
- Snabbokningsunderlag
- Tidbok

Manuellt flöde = När ett nytt mediaunderlag skapas via:

- Ny mediaundersökning

AUTOMATISKT FLÖDE

Automatiskt flöde

En mediaundersökning som skapas via

- Bokningsunderlag
- Snabbokningsunderlag
- Tidbok

Det är en inställning på vårdtjänsten som styr om informationen i Mediaundersökning är förifylld. Det går att ändra informationen i Mediaundersökning fram till patienten är ankomstregistrerad i kassan. Verksamheten beställer vilka vårdtjänster som ska vara vara inställda med en förvald Mediaundersökning.

När en mediaundersökning läggs till via automatiskt flöde skapas det även ett underlag i vyn Mediaundersökningar.

MANUELLT FLÖDE

Fönstret Ny Mediaundersökning

Här skapas en Ny mediaundersökning manuellt.

Med **Direktkopplad utrustning** kan undersökningen skickas till utrustningens arbetslista för mediafångst. Detta är utrustningar som har en automatisk koppling till arkivet, tex Upload & Store

OBS!! Händelsedatum

Ny mediaundersökning 19

Vårdkontakt
2023-03-27 41. Vaccination - Vårdcentralssjuksköterska, Visustest (distriktssköterska), Vårdcentralen Alvesta, Vårdcentralen Alve...

Vårdpersonal
Vårdcentralssjuksköterska, Visustest, distriktssköterska

Mediaenhet
Vårdcentralen Alvesta

Undersökning
Nevus

Händelsedatum
2023-03-27 14:08

Utrustningstyp
Fristående Direktkopplad

Utrustning
VC Alvesta

Patienten godkänner att media används i utbildningssyfte

Stäng Spara Spara och skicka till utrustning

MEDIAHANTERAREN - MEDIAUNDERSÖKNINGAR

Fönstret Mediaundersökningar: Visar alla mediaundersökningar som är tillgängliga för en enskild patient eller alla patienter på din inloggade enhet.

Media kan ifrån detta fönster öppnas och visas via en mediavisare.

Det går även att filterara utefter mediaundersökningens status.

Mediaundersökningar

Visa vy för
 Vald patient Alla patienter

Från Till Vårdande enhet
Akutgeriatrisk avdelning 13 (+8) **Fler filter**

Status
Välj status
 Skapad
 Planerad
 Bokad
 Media finns
 Ska makuleras
 Avbokad och Makulerad

Personnummer	Patient	Datum och tid	Undersökning	Vårdkontakt	Vårdpersonal	Vård...
19 82r		2022-05-03 13:00	Sår	2022-05-03 - 2022-05-0...		Aku...
19		2022-05-03 00:00	Sår	2022-05-03, Ny, 1. Mott...		Aku...
19		2022-05-03 00:00	Sår	2022-05-03, Ny, 1. Mott...		Aku...
19		2022-05-02 08:44	Reumatism uppföljning	2022-04-21 - 2022-04-2...		Aku...
19		2022-04-28 17:17	Ultraljud	2021-03-16 - 2021-03-1...		Aku...
19		2022-04-21 10:00	Hudförändring	2022-04-21 - 2022-04-2...		Aku...
19		2022-04-21 08:44	Reumatism uppföljning	2022-04-21 - 2022-04-2...		Aku...
19		2022-04-21 08:44	Hudförändring	2022-04-21 - 2022-04-2...		Aku...
19		2022-04-21 08:44	Hudförändring	2022-04-21 - 2022-04-2...		Aku...
19		2022-04-21 08:44	Ultraljud	2022-04-21 - 2022-04-2...		Aku...
19		2022-04-21 08:44	Sår	2022-04-21 - 2022-04-2...		Aku...
19		2022-04-21 08:44	Sår	2022-04-21 - 2022-04-2...		Aku...
19		2022-04-21 08:44	Hudförändring	2022-04-21 - 2022-04-2...		Aku...
19		2022-04-21 08:44	Reumatism uppföljning	2022-04-21 - 2022-04-2...		Aku...
19		2022-04-21 08:44	Hudförändring	2022-04-21 - 2022-04-2...		Aku...
19 82u		2022-04-21 08:44	Reumatism uppföljning	2022-04-21 - 2022-04-2...		Aku...

NUMMER
-0000001306

Rensa filter
Uppdatera

1 - 16 av 16

MEDIAHANTERARE - STATUSBESKRIVNING

Statusbeskrivning: En mediaundersökning kan ha 6 olika statusar

Status ↑	US NUMMER	
Skapad		...
Media finns	TCC001-0000409	...
Ska makuleras	TCC001-0000408	⊗
Bokad	TCC001-0000002	...
Makulerad	TCC001-0000423	⊗
Planerad		...

Skapad

- När en mediaundersökning är skapat via ett automatiskt flöde (via bokningsunderlag, snabbokningsunderlag) så får den alltid status **'Skapad'**. I det här statuset går det endast att **Avboka** och **Makulera** undersökningen. Om bokningsunderlaget, snabbokningsunderlaget tas bort får mediaundersökningen status **Avbokad** i vyn mediaundersökningar.

Planerad

- När mediaundersökningen skapas manuellt (via Ny mediaundersökning) och sparas får den status **'Planerad'**. I det här skedet är ingen information skickat till arkivet och det går att ändra i mediaundersökningens information.

Bokad

- När en mediaundersökning skapad via ett automatiskt flöde bokas i tidboken. Eller om det är en manuellt skapad mediaundersökning med direktkopplad utrustning som sparats via valet "Spara och skicka till utrustning" får den status **"Bokad"**. I detta status har informationen skickats till arkivet och det finns inte möjlighet att redigera i undersökningen i detta läge.

Media finns

- När media är importerad till mediaundersökningen och har sparats i mediaarkivet får den status **"Media finns"**. Det skapas även en journalreferens

Makulerad/ Ska makuleras

- Status när mediaundersökningen är makulerad eller ska makuleras. Det går att makulera alla undersökningar förutom dem med status **"Media finns"** De mediaundersökningar med status **"Media finns"** som behöver makuleras får status **"Ska makuleras"**. Detta för att undersökningen endast kan makuleras av behörig personal - Här ska kontakt med Röntgen tas.

Avbokad

- Mediaundersökning får status **"Avbokad"** när den aktivt avbokas via Tidboken, Mediaundersökningar, men även tas bort ifrån ett bokningsunderlag med status skapad, planerad, bokad.

MEDIAUNDERSÖKNING – US NUMMER

Vid status:

- Bokad
- Media finns
- Makulerad
- Ska Makuleras

Status ↑	US NUMMER	
Skapad		...
Media finns	TCC001-0000409	...
Ska makuleras	TCC001-0000408	⊗
Bokad	TCC001-0000002	...
Makulerad	TCC001-0000423	⊗
Planerad		...

Har det skapats ett unikt id nummer för mediaundersökningen som kan ses i fönstret Mediaundersökningar.

Bra att känna till då detta efterfrågas vid ev kontakt med Röntgen och VIS-supporten.

AVBOKA/MAKULERA UNDERSÖKNING

Det går att avboka /makulera mediaundersökning beroende på vilket status den har uppnått.


Avboka:

- Status **Skapad** kan avbokas via bokningsunderlaget eller via fönstret mediaundersökningar.
- Status **Planerad** avbokas via fönstret mediaundersökningar.
- Status **Bokad** avbokas via tidboken. Antingen så tas hela tiden bort eller tas mediaundersökningen bort i bokningsunderlaget.

Makulera:

- Status **Skapad**, **Planerad** och **Bokad** är det möjligt att makulera undersökningen direkt ifrån Cosmic.
- Status **Media finns** kan däremot inte makuleras ifrån Cosmic på grund av säkerhetsskäl.

Makulering sker via valet ”Ska makuleras” – Notifikation kommer upp.

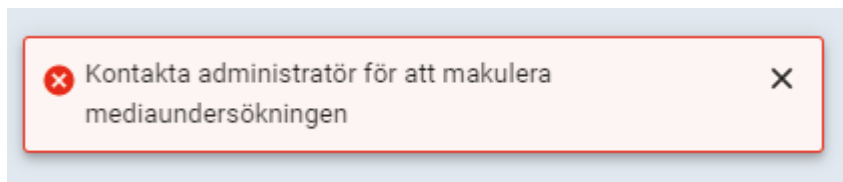

Kontakt ska då ske systemadministratör som makulerar undersökningen ifrån röntgens bildsystem Sectra Pacs.

MEDIAHANTERARE - KOPPLA/BIFOGA - UNIVIEW

Koppla/bifoga mediaundersökningar

Det går att koppla/bifoga utförda mediaundersökningar i vyerna:

- Journalanteckning – Bifoga vid sökord
- Remiss:
 - Skicka remiss
 - Remissvar

Se mediaundersökningar via mediavisaren UniView som är ett visningsverktyg och nås via Cosmic.

Det går att öppna och se på utförda mediaundersökningar i vyerna:

- Mediaundersökningar
- Journalanteckning
- Remiss
- Nova

Behörighet:

För att kunna öppna mediavisaren UniView krävs det en behörighet så kallat *Medarbetaruppdrag - Vård och behandling*.

Denna behörigheten lägger en administratör upp i verksamhetskatalogen på din enhet.

UNIVIEW- VISNINGSVERKTYG

Ifrån vyn **Mediaundersökningar** kan UniView öppnas som visningsverktyg på mediaundersökningar där Media finns via:

The screenshot shows the 'Mediaundersökningar' interface. At the top, there are filters for 'Visa vy för' (Vald patient, Alla patienter), 'Från' and 'Till' dates, and 'Media Enhet' (Välj enhet). A 'Fler filter' button and 'Rensa filter' link are also present. Below the filters is a table with columns: Personnummer, Patient, Datum och tid, Undersökning, Vårdkontakt, Vårdpersonal, Media Enhet, Status, and US NUMMER. The table contains several rows, with the second row highlighted in blue. A red box highlights the 'Media Enhet' and 'Status' columns for the highlighted row.

Personnummer	Patient	Datum och tid	Undersökning	Vårdkontakt	Vårdpersonal	Media Enhet	Status	US NUMMER
19 9	Kronoberg Y	2022-07-05 10:42	EKO	2022-04-04 - 2022-06-1...	(IT-utveckl...	Kirurgavdelning 33	Media finns	TCC001-0000517
19 9	Kronoberg K	2022-06-28 14:14	EKO	2022-04-04 - 2022-06-1...	(IT-utveckl...	Kirurgavdelning 33	Media finns	TCC001-0000504
19 9	Kronoberg I	2022-07-01 10:56	EKO	2022-04-04 - 2022-06-1...	(IT-utveckl...	Kirurgavdelning 33	Bokad	TCC001-0000514
19 9	Kronoberg K	2022-07-01 10:55	EKO	2022-04-04 - 2022-06-1...	(IT-utveckl...	Kirurgavdelning 33	Bokad	TCC001-0000513

Dubbelklicka på aktuell undersökningsrad.

This close-up shows the row for 'TCC001-0000504' selected. A context menu is open over the row, with options: 'Visa media', 'Importerera media', 'Visa', and 'Ska makuleras'. The 'Visa media' option is highlighted.

(IT-utveckl...	Kirurgavdelning 33	Media finns	TCC001-0000517	...
(IT-utveckl...	Kirurgavdelning 33	Media finns	TCC001-0000504	...
(IT-utveckl...	Kirurgavdelning 33	Bokad	TCC001-0000514	...
(IT-utveckl...	Kirurgavdelning 33	Bokad	TCC001-0000513	...
(IT-utveckl...	Kirurgavdelning 33	Bokad	TCC001-0000512	...
(IT-utveckl...	Kirurgavdelning 33	Bokad	TCC001-0000511	...

Högerklick på undersökningsraden - Visa media


This close-up shows the row for 'TCC001-0000504' selected. A context menu is open over the row, with options: 'Visa media', 'Importerera media', 'Visa', and 'Ska makuleras'. The 'Visa media' option is highlighted.

elning 33	Media finns	TCC001-0000517	...
elning 33	Media finns	TCC001-0000504	...
elning 33	Bokad	TCC001-0000514	...
elning 33	Bokad	TCC001-0000513	...
elning 33	Bokad	TCC001-0000512	...
elning 33	Bokad	TCC001-0000511	...

Klick på kontextmenyn på aktuell mediaundersökning – Visa media.

UNIVIEW-VISNINGSVERKTYG

UniView öppnas och den insamlade Median visas upp.

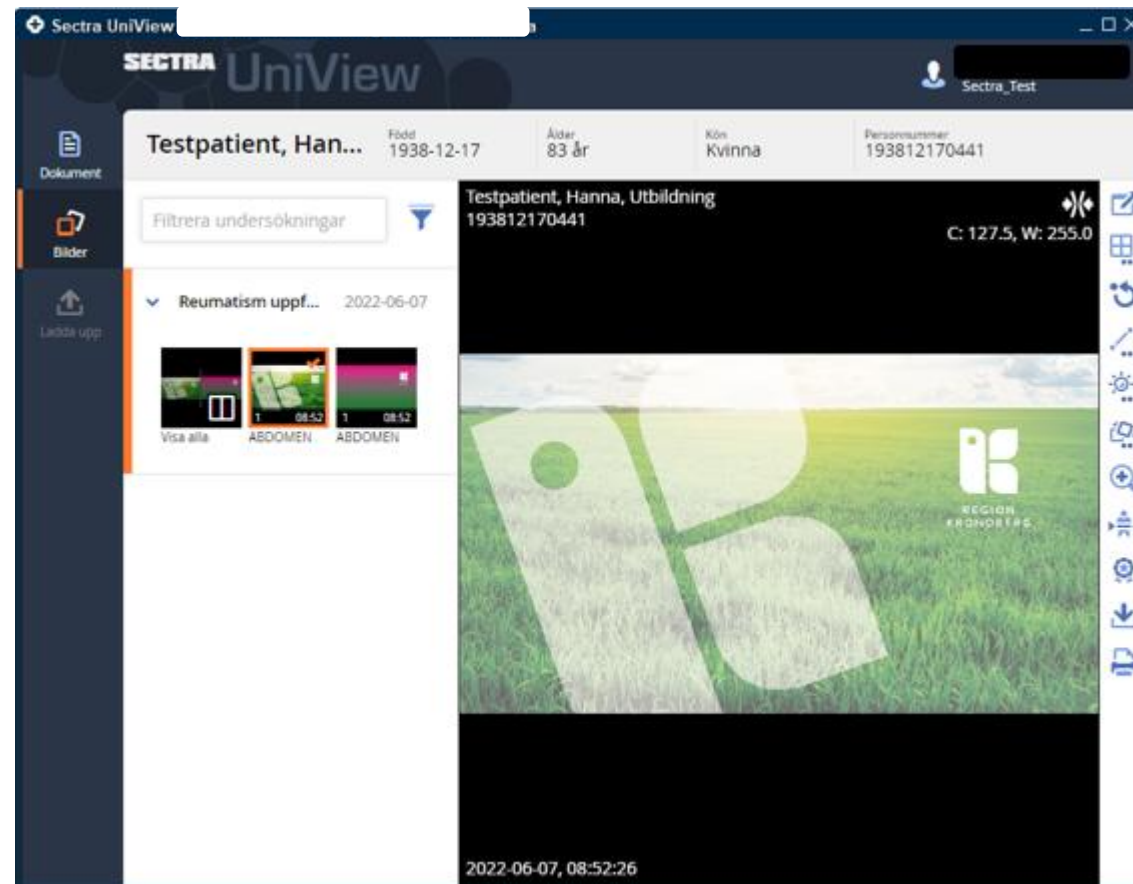

SE MEDIA VIA JOURNALANTECKNING



Ifrån **Journalen** går det att bifoga media i en journalanteckning.

The screenshot shows a medical journal interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains a tree view of folders and documents, including 'Kirurgkliniken', 'Gemensamma dokument', 'Patientformulär', 'Region Kronoberg', 'Sjukhus', 'Vårdcentraler', 'Psykiatri', 'Rehabilitering', 'Andra vårdgivare', 'Andra vårdgivare kommun', 'Alla referenser', 'Journaltabell', 'Tillväxtkurva', 'Dokument och blanketter', 'Blanketter', 'Centralt skannade dokument', 'Bifogade filer', 'Rapportblad', 'Vårdplan', 'Vårdplan Sårbehandling (2022-08)', 'Medicinska vårdåtagande', and 'Ehbetens kontakter'. The main content area displays a list of journal entries. The first entry is 'Skopiundersökning' with a date of '2022-09-01 14:33'. Below it, a yellow highlighted row shows a media attachment: '2022-06-28 14:14 EKO' with a paperclip icon. A context menu is open over this attachment, listing options: 'Ändra', 'Radera', 'Sätt som 'Ej klar för signering'', 'Signera', 'Signera med vidimerare...', 'Öppna bifogad fil', 'Kopiera värde', 'Ändra vårdkontakt, datum och tid', 'Visa sökordsinformation', and 'Visa anteckningsinformation'. The 'Öppna bifogad fil' option is highlighted in yellow. The second entry is another 'Skopiundersökning' with a date of '2022-08-30 14:18'. The third entry is 'Skopiundersökning' with a date of '2022-07-05 10:42 EKO (...)'. The interface also shows fields for 'Legitimationssätt', 'Kontaktorsak', and 'Planering' for each entry.

För att öppna median klicka på länken vid gemet eller högerklick - Öppna bifogad fil.


BIFOGA MEDIAUNDERSÖKNING I SKICKA REMISS

Det går att bifoga en Mediaundersökning när en remiss skapas.

Information om vårdförlopp*	Införda vårdförlopp Kortversion malignt melanom
Diagnos, fråga*	Cancerutredning, malignt melanom
Status*	
Utseende*	
Anamnes*	
Antikoagulantia / trombocythämmare*	
Information*	
Skannat dokument	
Skannat dokument - media	  Ta bort
	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div>
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>Mediaundersökning 2023-03-14 15:00, Nevus, Läkare, Test (läkare), Vårdcentralen Alvesta</p></div>
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: right;">Ny mediaundersökning Lägg till och ta bort mediaundersökningar</div>

SE MEDIA VIA REMISS

Det går att öppna en bifogad Mediaundersökning ifrån **Inkommande remisser**.

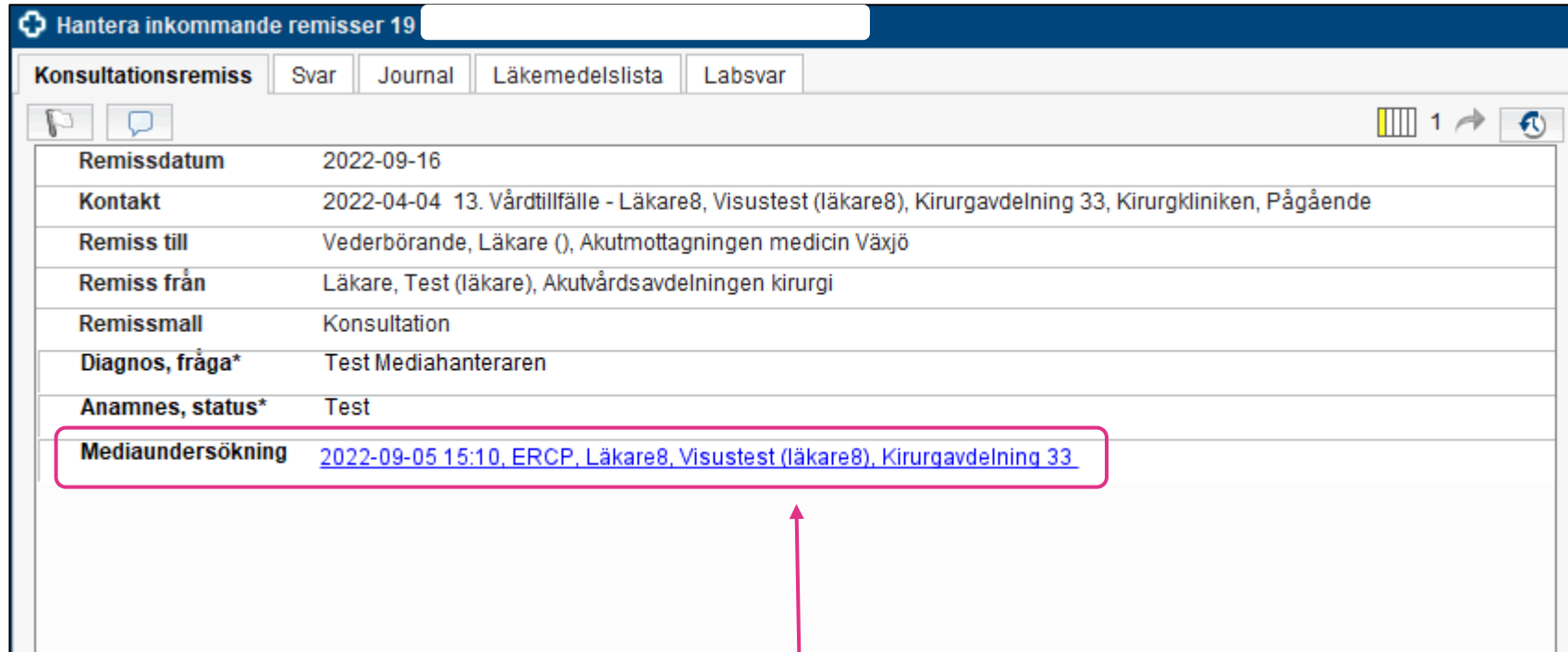

The screenshot shows a web application interface for managing incoming referrals. The title bar reads 'Hantera inkommande remisser 19'. Below the title bar are tabs for 'Konsultationsremiss', 'Svar', 'Journal', 'Läkemedelslista', and 'Labsvar'. The main content area displays a table of referral details:

Remissdatum	2022-09-16
Kontakt	2022-04-04 13. Vårdtillfälle - Läkare8, Visustest (läkare8), Kirurgavdelning 33, Kirurgkliniken, Pågående
Remiss till	Vederbörande, Läkare (), Akutmottagningen medicin Växjö
Remiss från	Läkare, Test (läkare), Akutvårdsavdelningen kirurgi
Remissmall	Konsultation
Diagnos, fråga*	Test Mediahanteraren
Anamnes, status*	Test
Mediaundersökning	2022-09-05 15:10, ERCP, Läkare8, Visustest (läkare8), Kirurgavdelning 33

A red box highlights the 'Mediaundersökning' field, and a red arrow points to the link within it.


Öppna Mediaundersökningen med att klicka på länken.

SE MEDIA VIA REMISSVAR

Det går i ett remissvar att öppna en länkad journalanteckning där en Mediaundersökning är bifogad.

Detta går att göra ifrån vyerna:

- Osignerat/ovidimerat
- Inkorg svar
- Inkommande/Utgående remisser
- Patientens svarslista

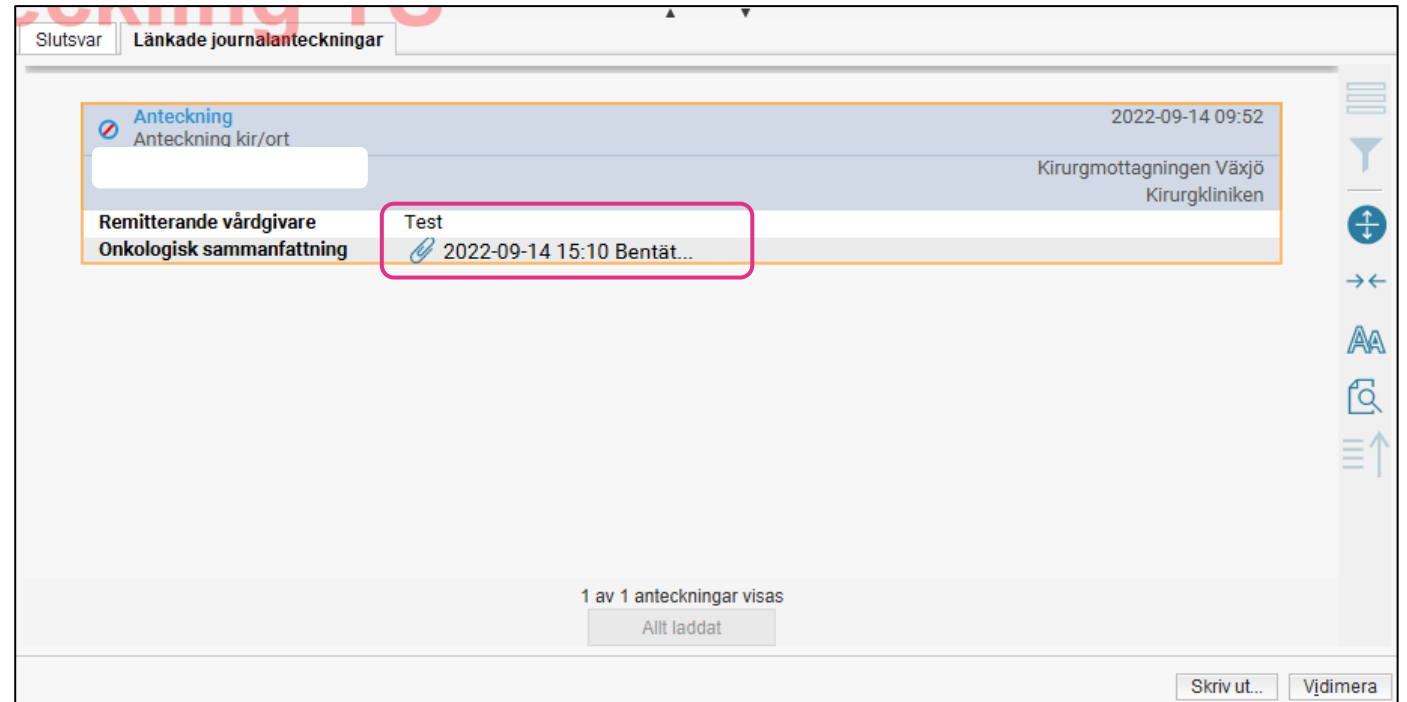


Öppna den bifogade mediaundersökningen precis som ifrån Journalen.
Klicka direkt på länken vid gomet eller högerklick - **Öppna bifogad fil.**

ATT TÄNKA PÅ



- Mediaunderlag utan media rensas efter 30 dagar. Undersökningen blir rödmakerad i fönstret
Mediaundersökningar
- Röd markerat mediaunderlag i fönstret Mediaundersökningar vid skapandet av ett mediaunderlag –
Detta tyder på att något gått fel och mediaunderlaget har då inte skickats vidare till utrustningen. Skicka igen.
- Viktigt att tänka på att Vårdkontaktens datum följer mediaundersökningen.
- Inte använda ”patienten godkänner att media används i utbildningssyfte” efter som det inte går att ångra eller spåra.

AUTENTISERING UPLOAD AND STORE

Behörighet: För att kunna autentisera sig behövs *Medarbetaruppdrag - Vård och behandling*.
Denna behörigheten lägger en administratör upp i verksamhetskatalogen på din enhet.

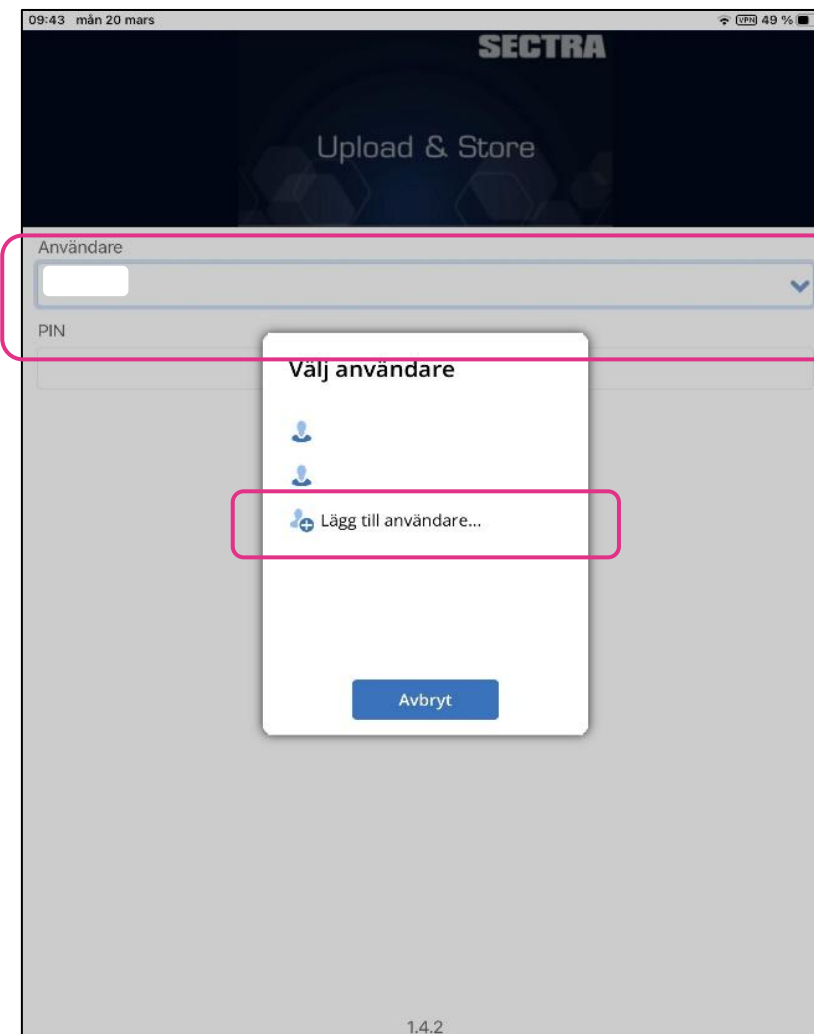

AUTENTISERING UPLOAD AND STORE

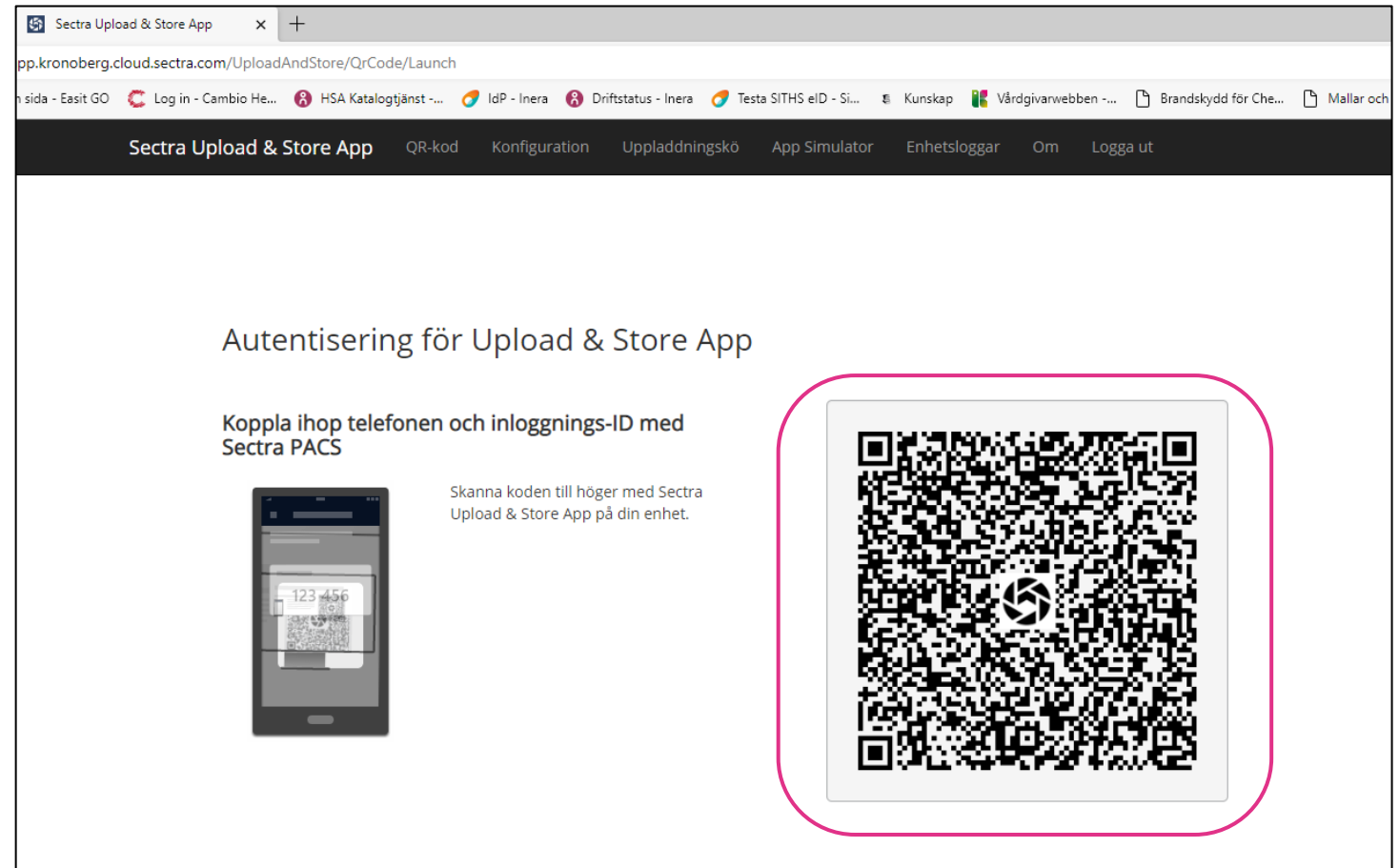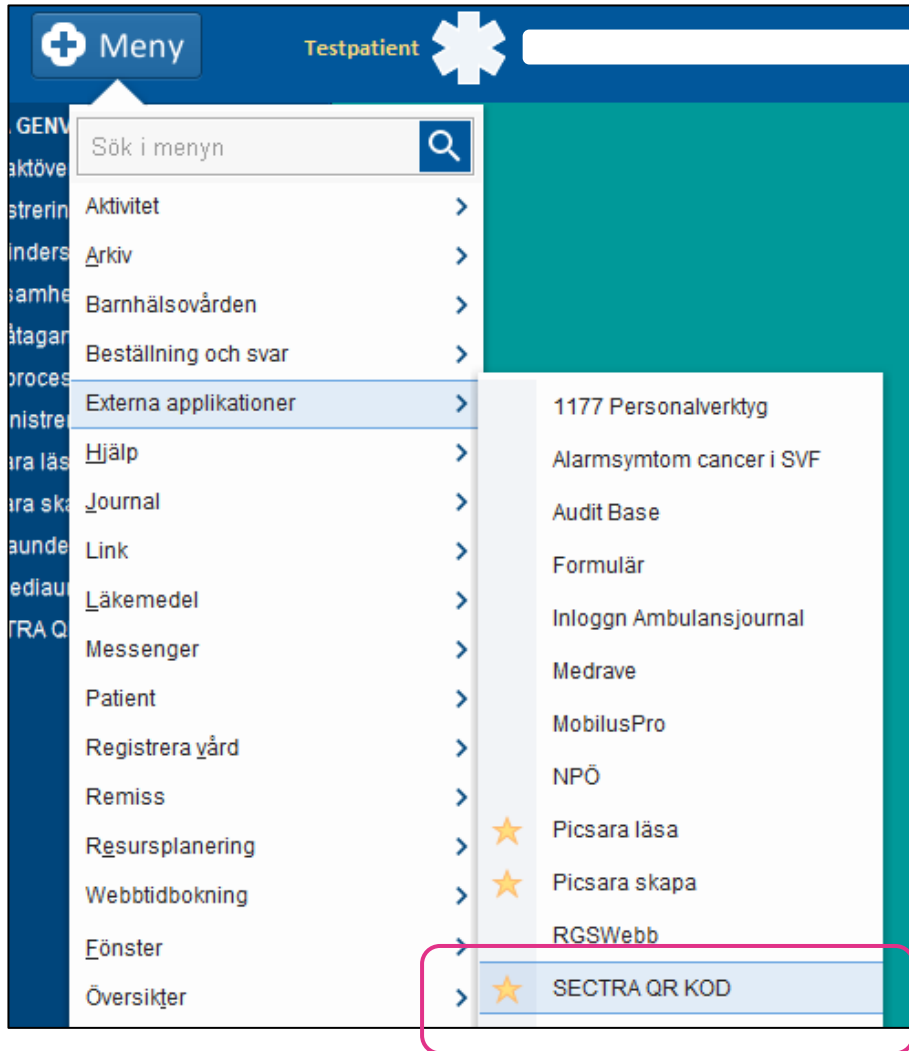

En registrering/autentisering per användare och telefon.

Omautentisering behöver utföras efter 6 månader.

AUTENTISERING UPLOAD AND STORE

09:52 mån 20 mars 48 %

< Sectra Upload & Store Välj PIN-kod

Välj en ny personlig PIN-kod med mellan 4 och 12 siffror för appen på denna enhet.

Ny PIN-kod



Bekräfta PIN-kod

SPARA

Välj en Pin-kod 4-12 siffror

Vid oautentisering efter 6 mån eller om man glömt lösenordet – kommer en fråga om byta pinkod eller behålla den gamla.

SAMLA IN MEDIA

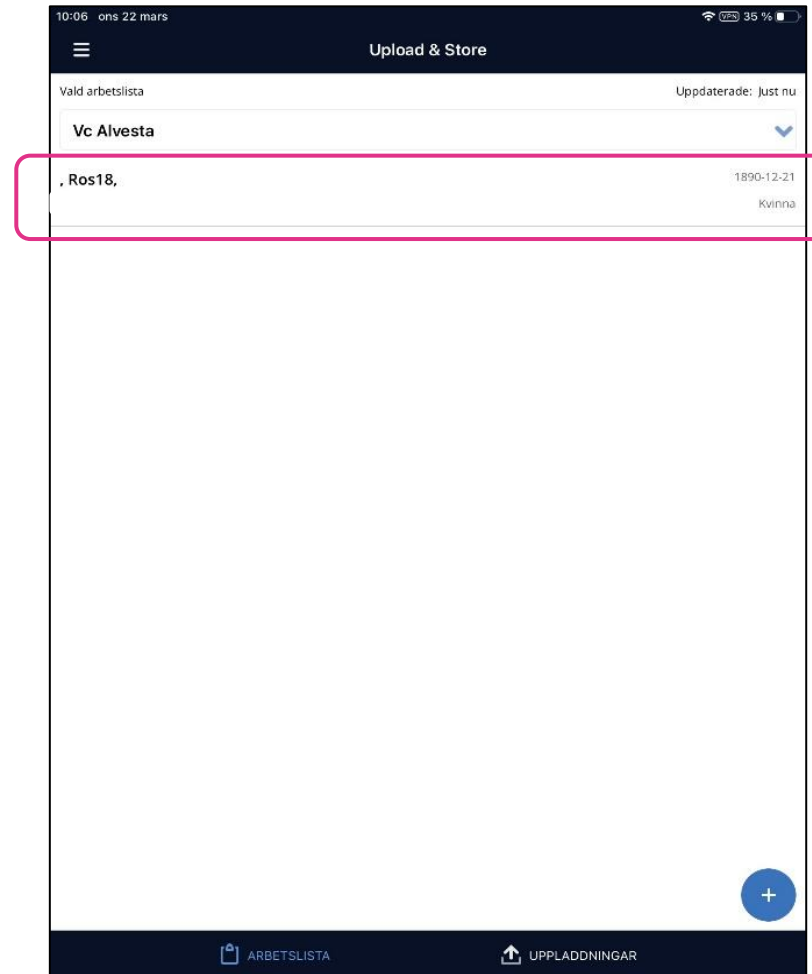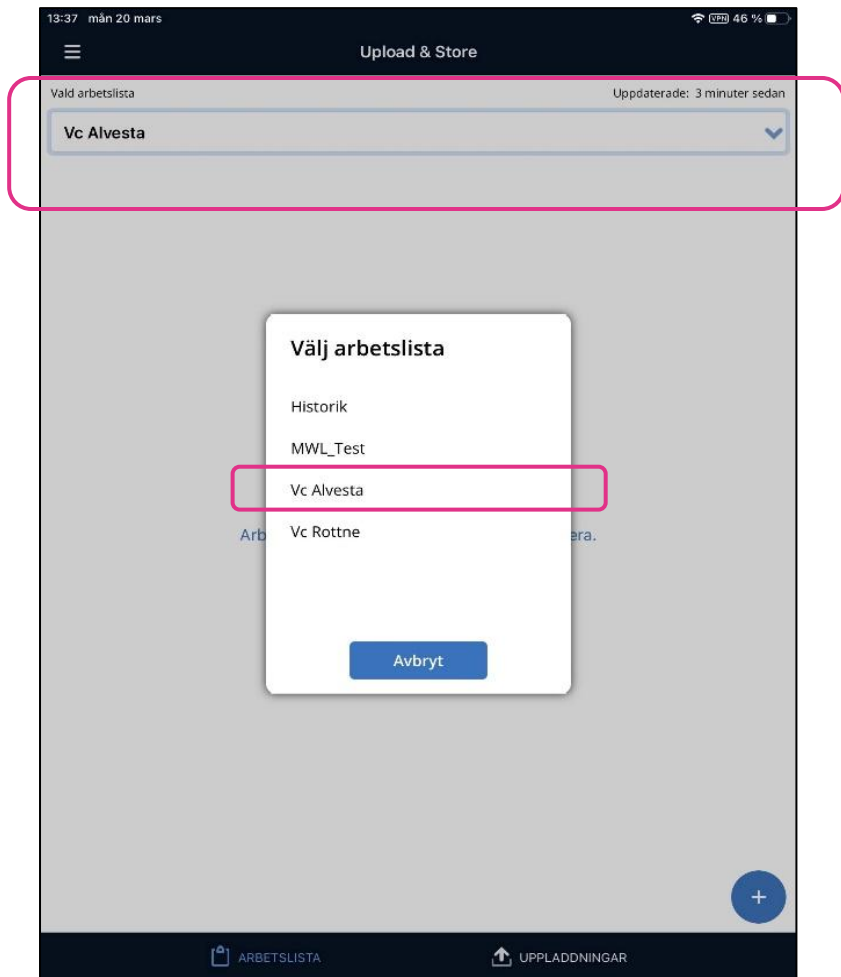

Mediaunderlaget är synligt i worklisten 10 h före och efter bokningen - händelsetiden

SAMLA IN MEDIA - UNDERSÖKNINGSKOMMENTAR

13:57 mån 20 mars 43%

Upload & Store Undersökning

Öppna i UniView Välj media

, Ros18, 1890-12-21
Kvinna

Undersökningsbeskrivning

Nevus

Undersökningskommentarer

KAMERA LADDA UPP

13:57 mån 20 mars 43%

Upload & Store Undersökning

Öppna i UniView Välj media

, Ros18, 1890-12-21
Kvinna

Undersökningsbeskrivning


Nevus

Undersökningskommentarer

Hudförändring

KAMERA LADDA UPP

SAMLA IN MEDIA


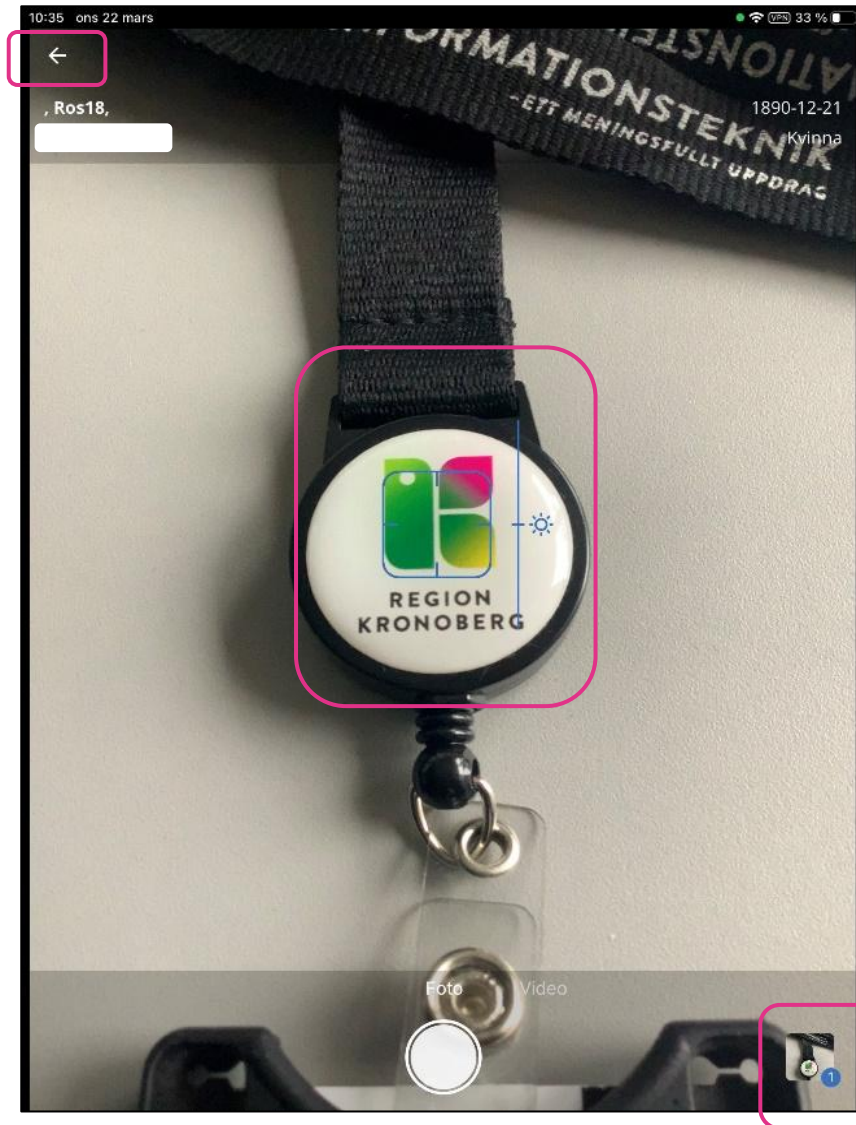


När foto är taget syns den insamlade median i en liten ruta nere till vänster – där står även antalet bilder som är insamlade

Det går att klicka i kameravyn för att ställa in fokus samt zooma med två fingrar drar in el ut beroende på zoomning.


När insamlingen är färdig - Pila tillbaka längst upp till vänster eller klicka på bilden nere till höger

SAMLA IN MEDIA – KROPPSDDEL/SIDA

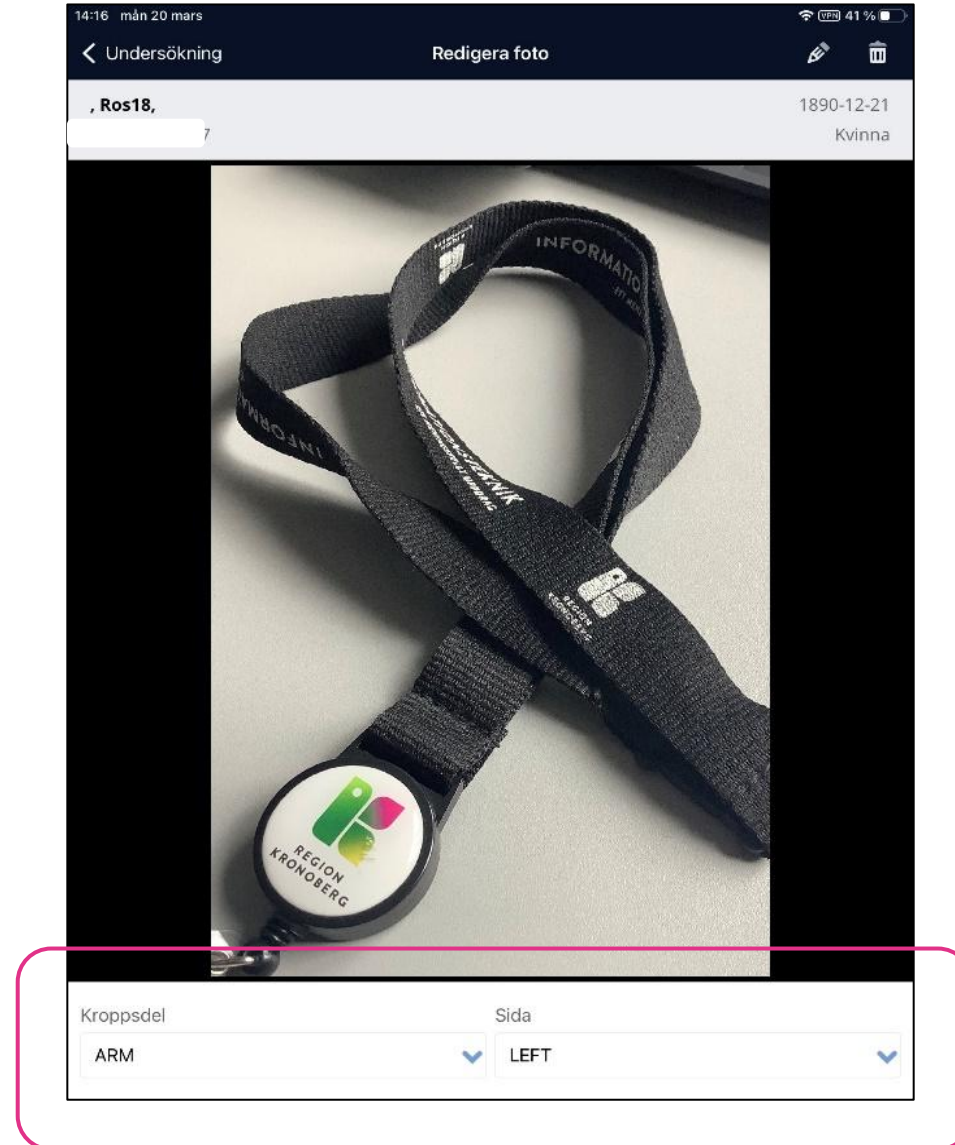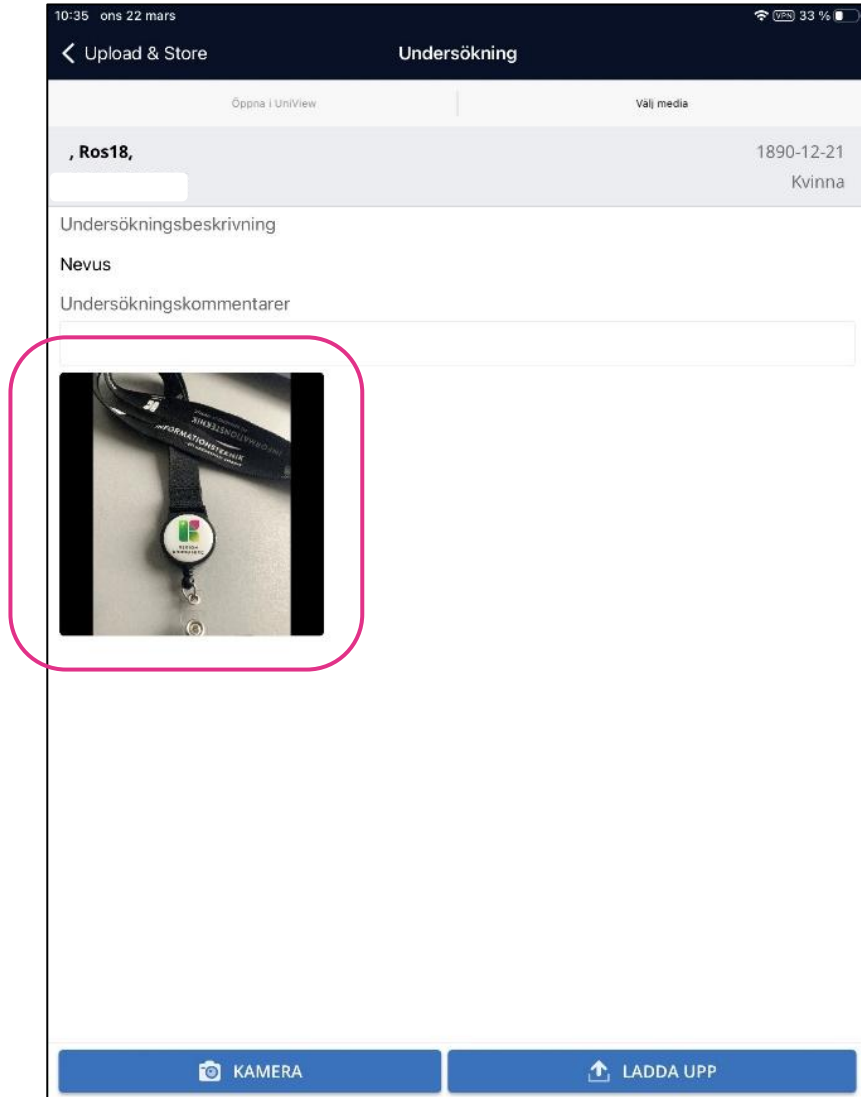


Kroppsdel och Sida
uppvisas i Uniview

SAMLA IN MEDIA – REDIGERA

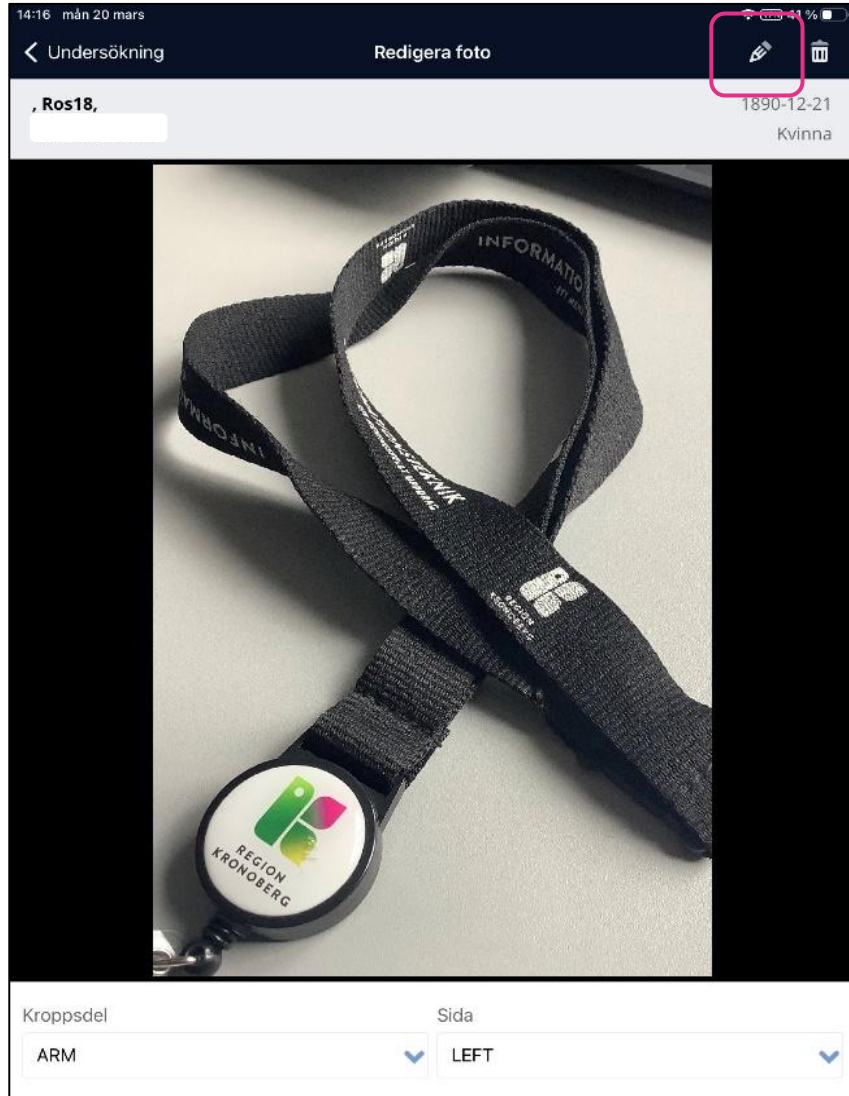


Det går att redigera bilderna direkt i appen.

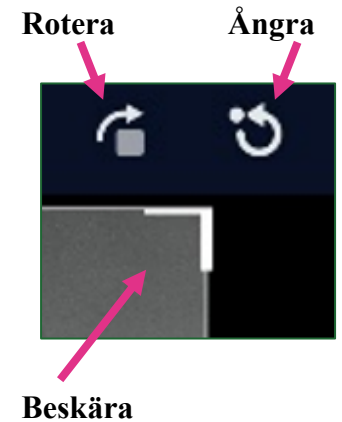


SAMLA IN MEDIA - RADERA

1.


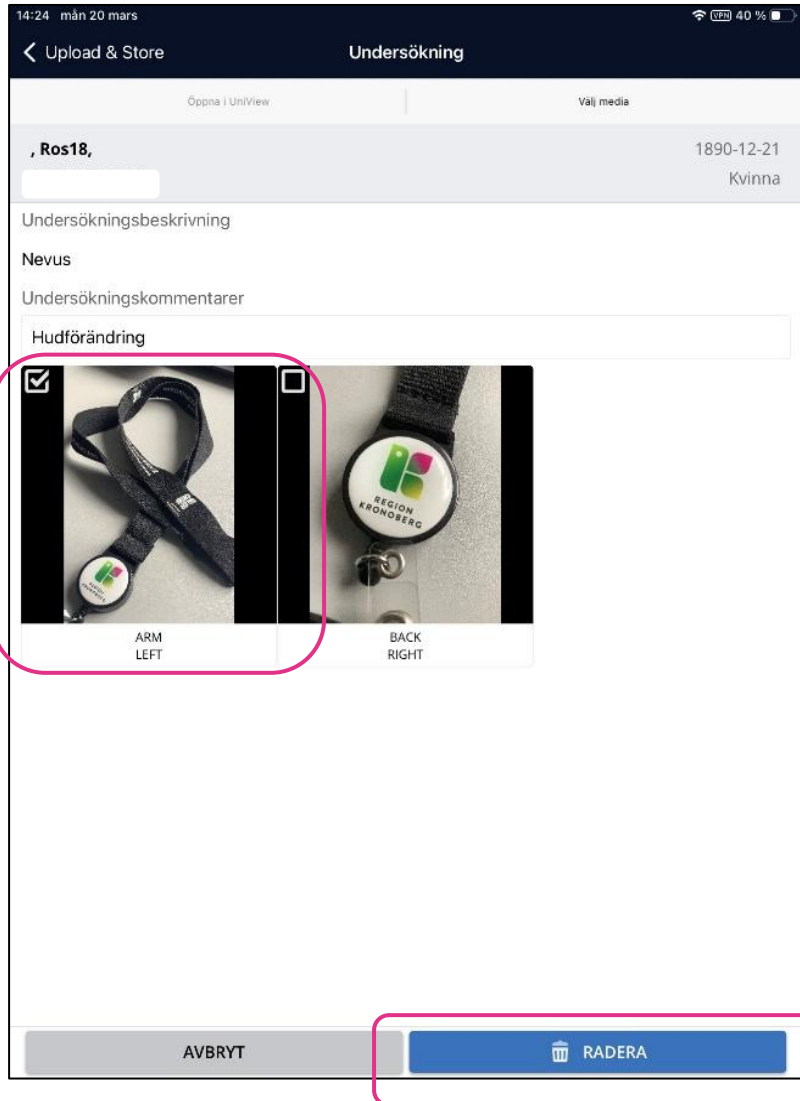


2.

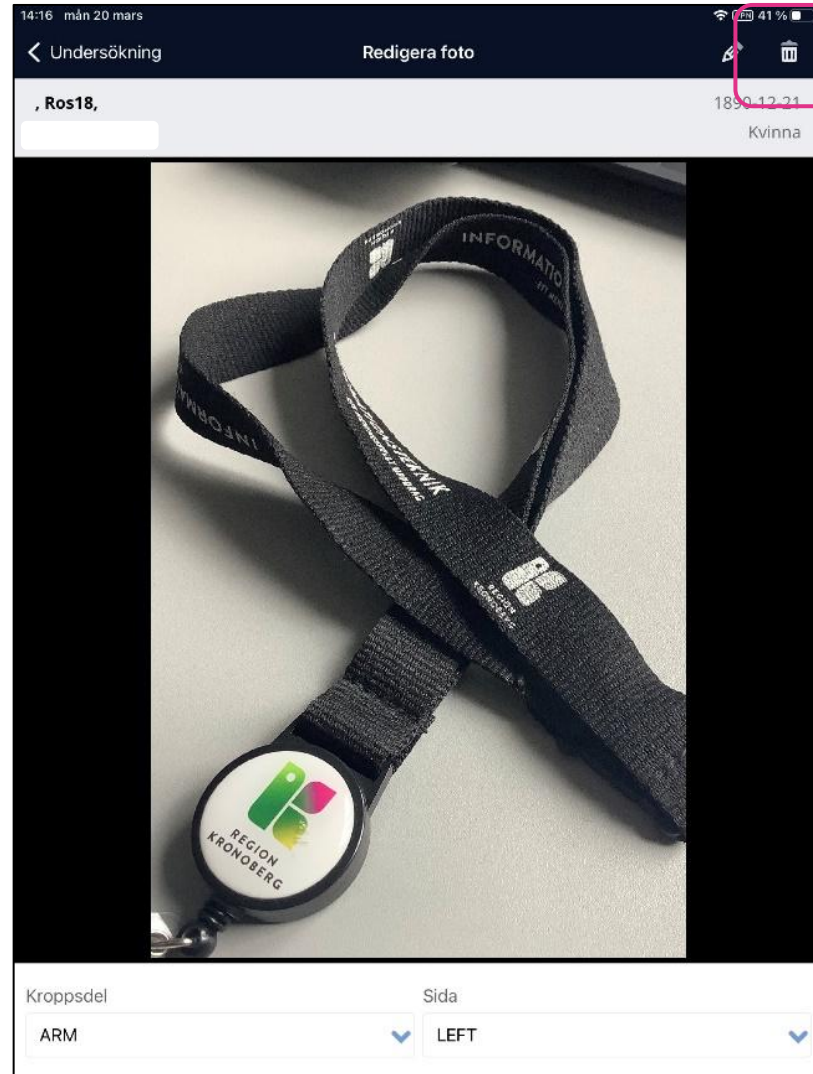



Det finns två tillvägagångsätt att radera bilder direkt i appen.

SAMLA IN MEDIA – LADDA UPP

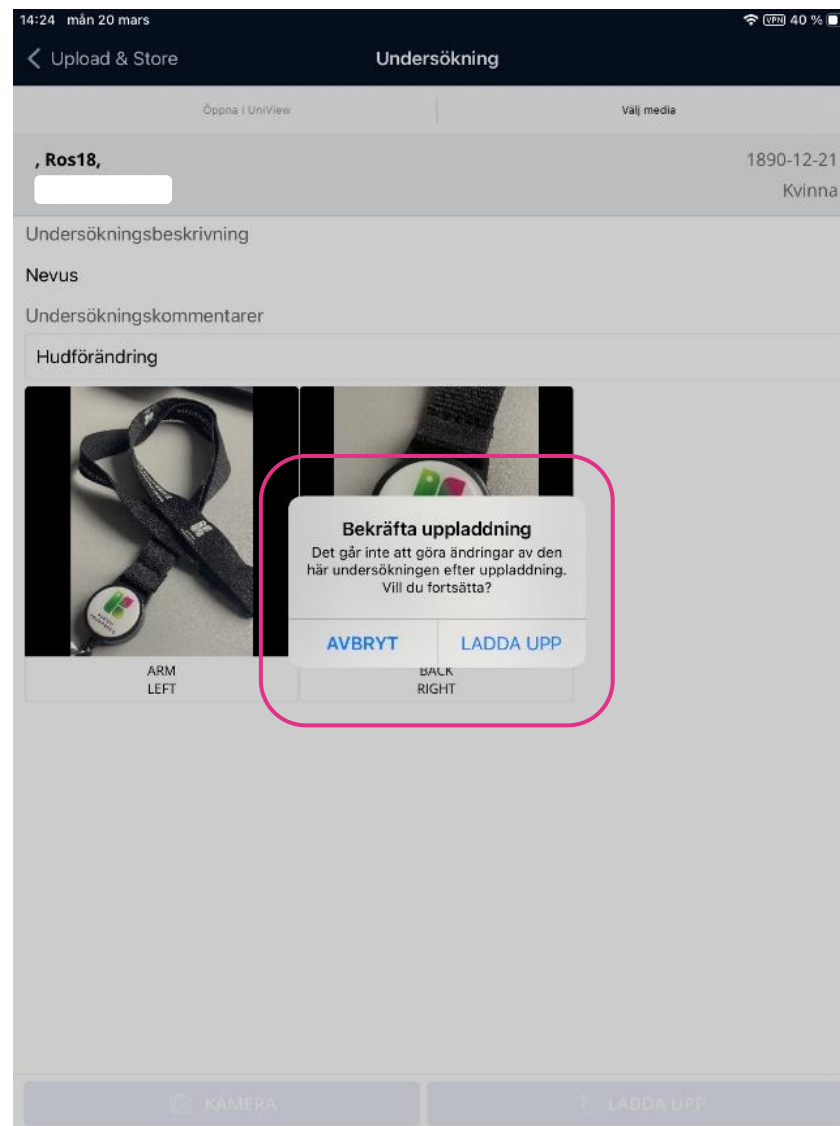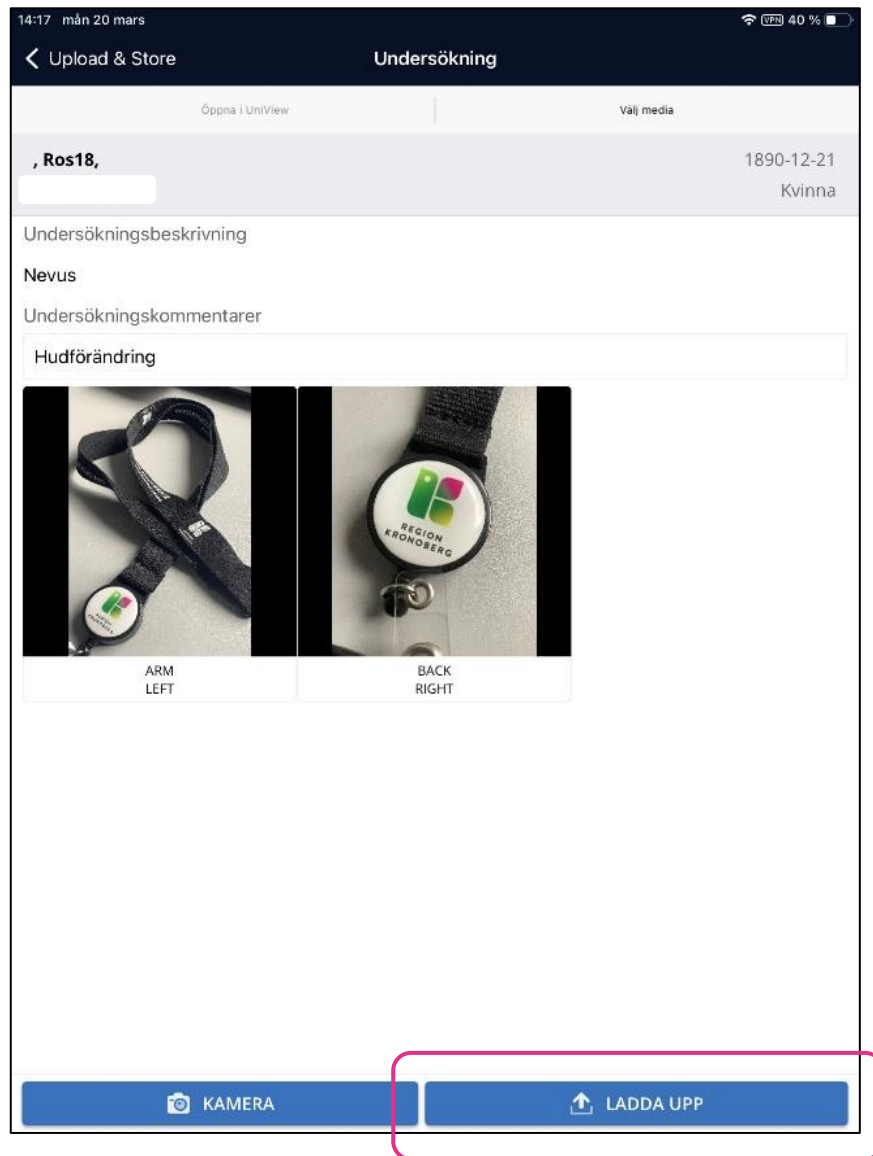



När uppladdning är bekräftad - går det inte att ändra i den insamlade median, men det går att lägga till fler bilder i upp till 30 dagar.

SAMLA IN MEDIA – LADDA UPP

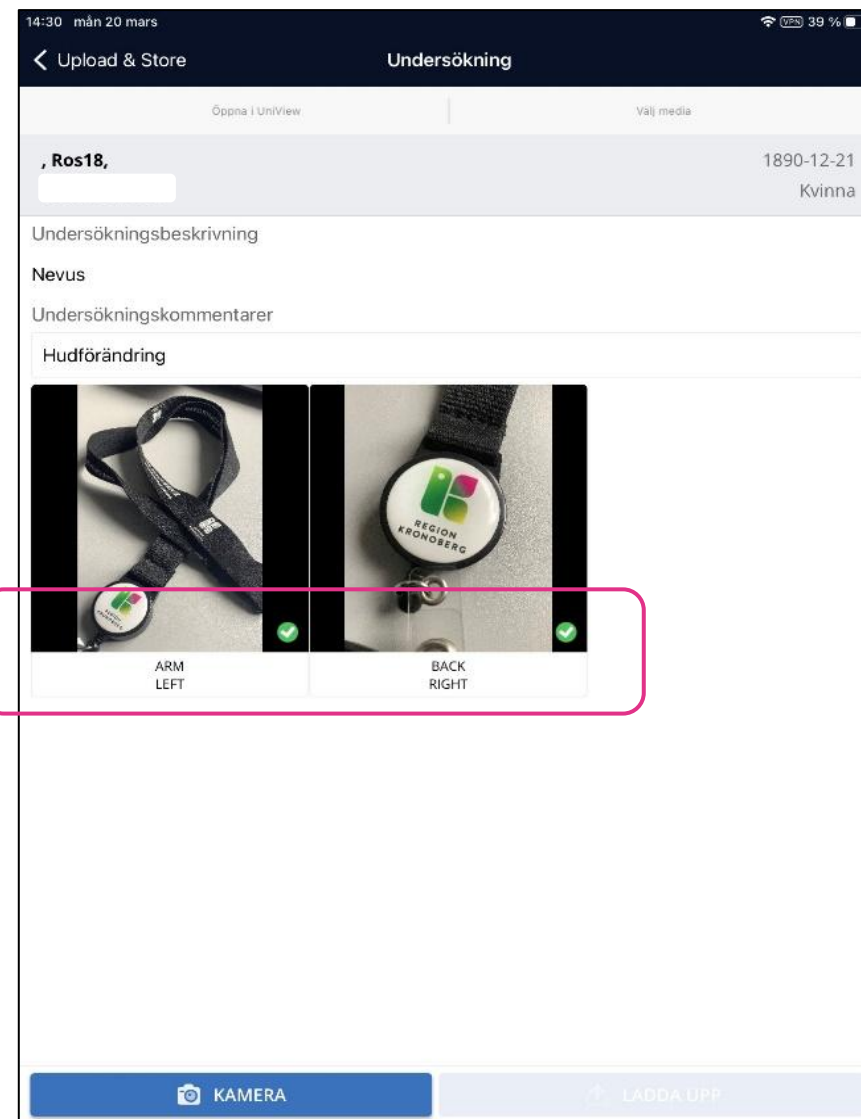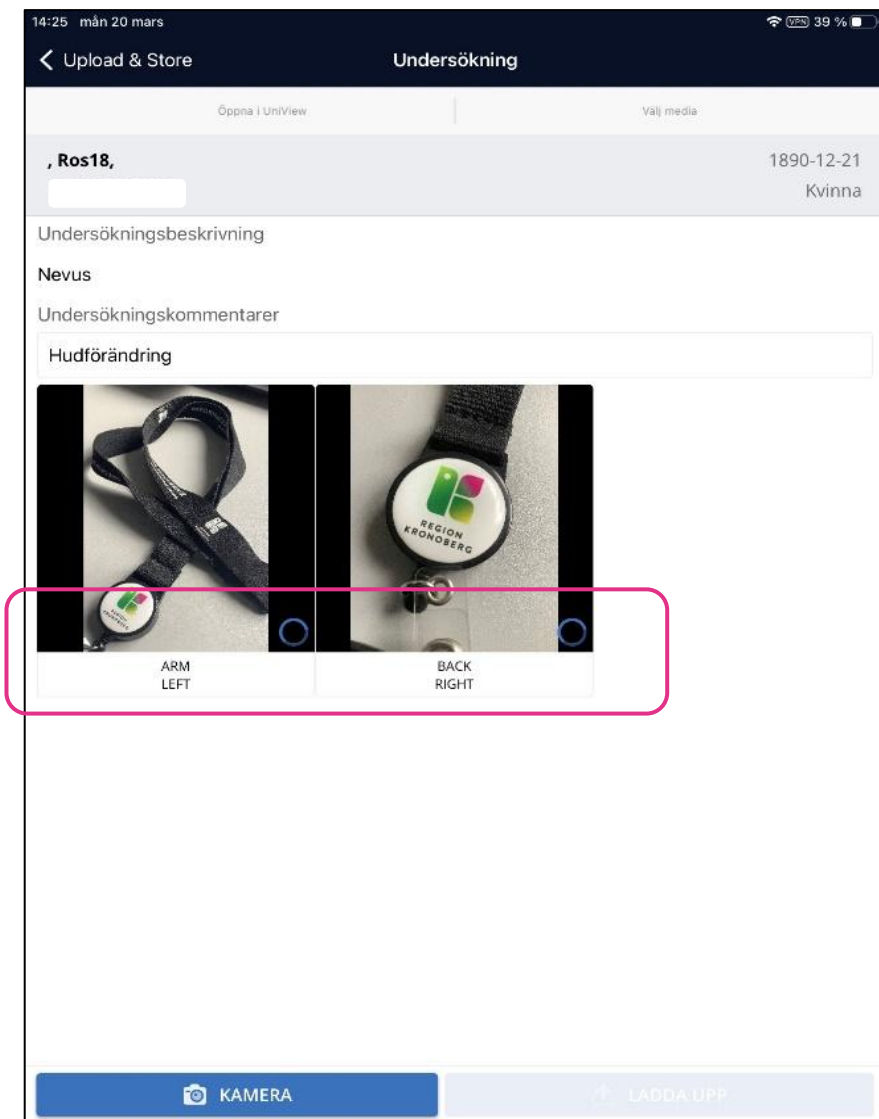



Håll appen Upload & Store öppen medans uppladdningen sker.

UPPLADDNING - HISTORIK

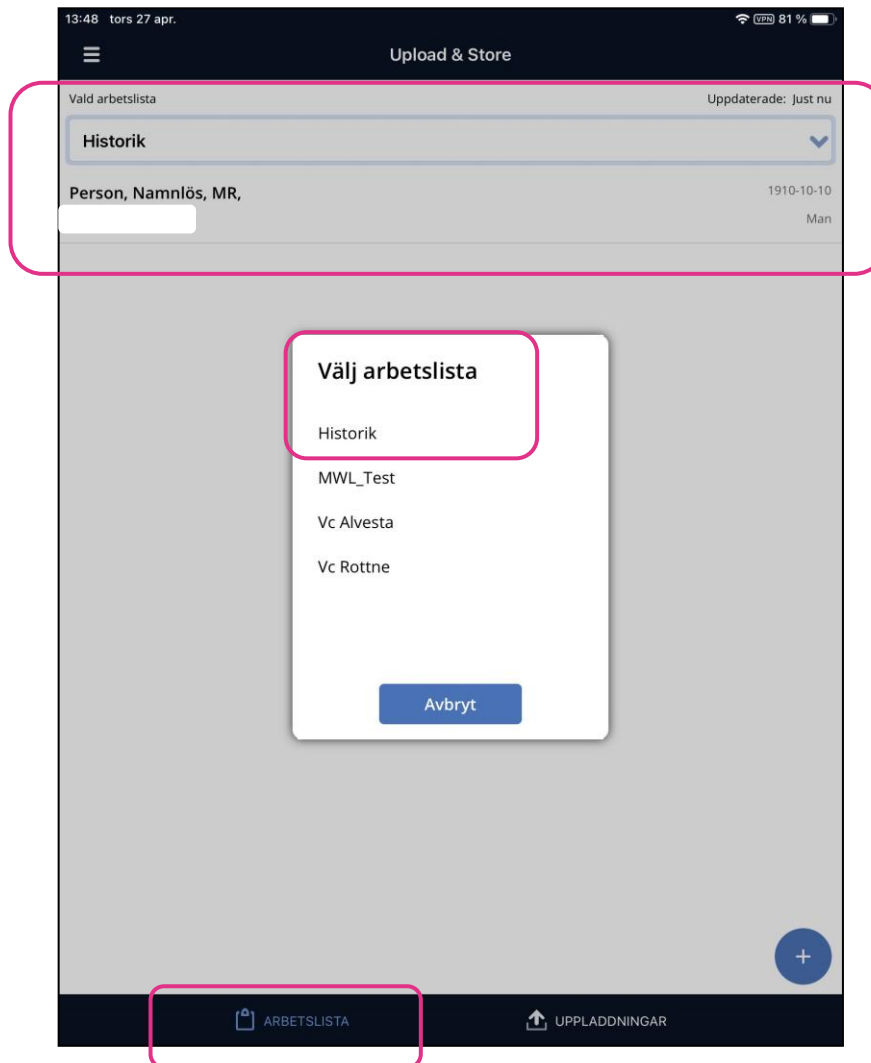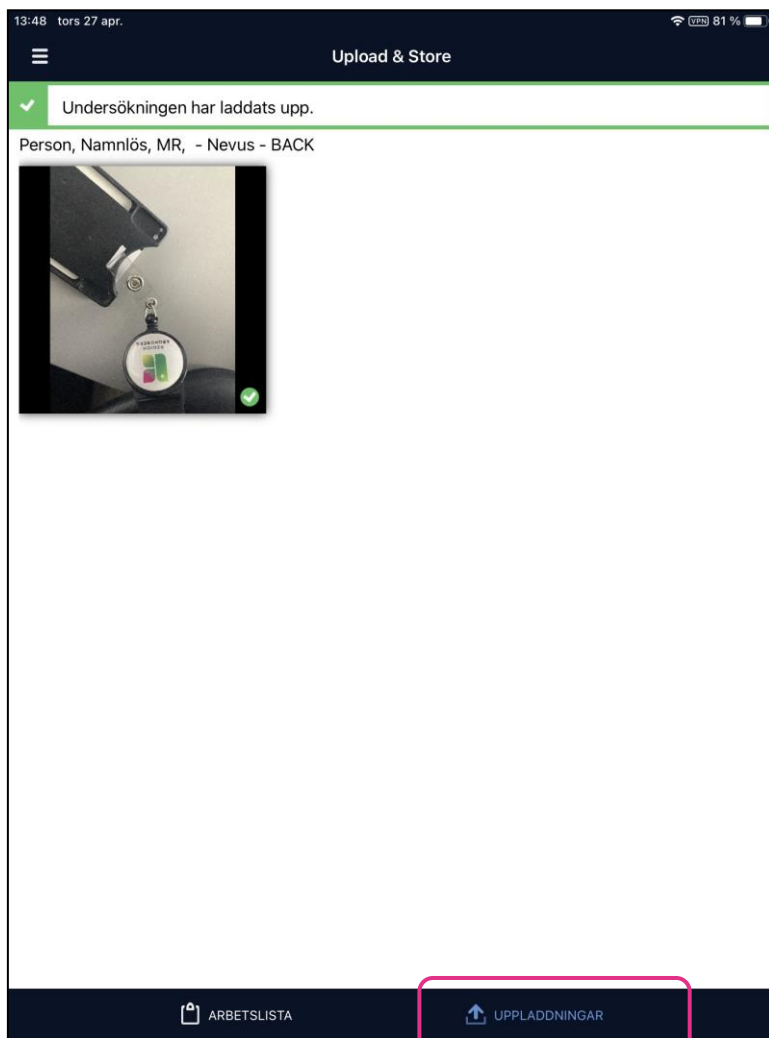

I vyn **Uppladdningar** ligger det uppladdade underlaget och median kvar i 2 h. Därefter flyttas underlaget till Historik. – det går att samla in mer media ifrån båda vyerna och ladda upp.

ÄNDRA/GLÖMD PIN - LOGGA UT

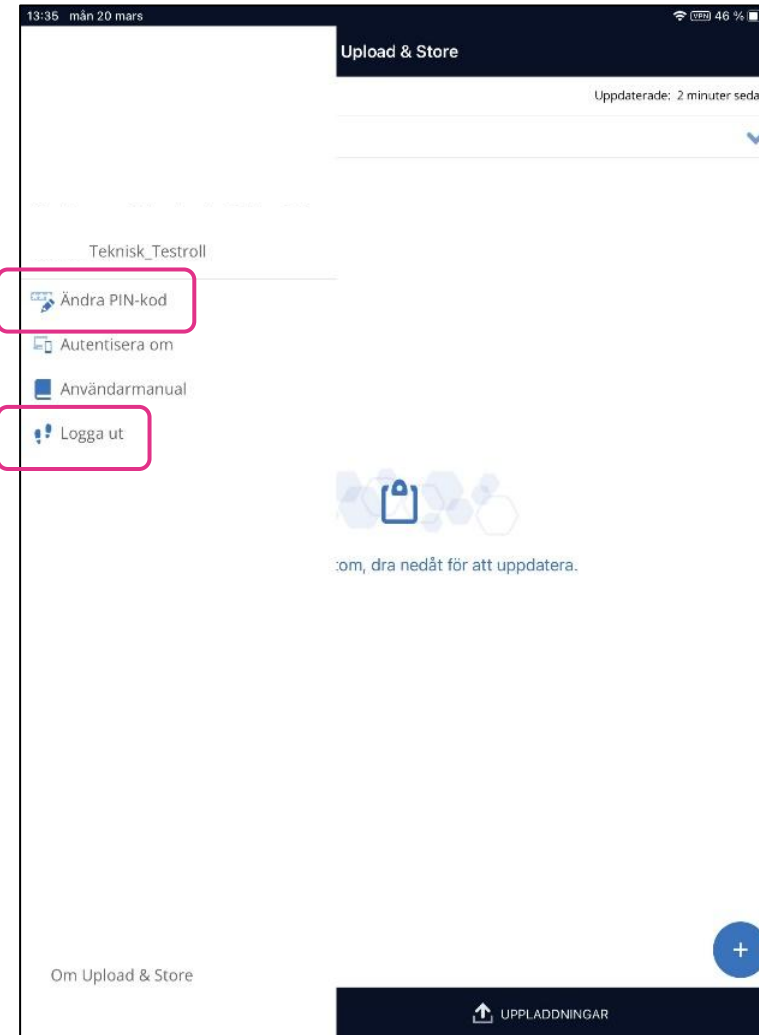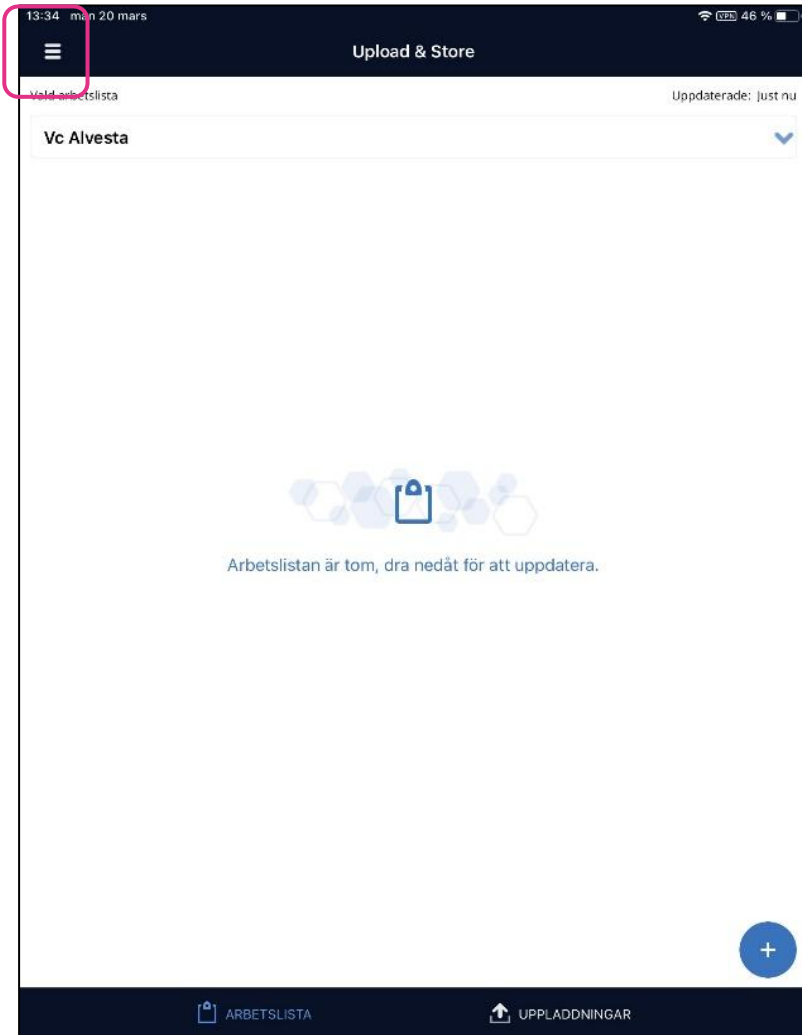

Det går att ändra
pinkod inifrån appen.

Logga ut via Meny
eller ”swipa” appen.



**REGION
KRONOBERG**